



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


MÁY RUNG HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG

SureSmile® VPro™

1. CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

SureSmile VPro được thiết kế để sử dụng cho bệnh nhân chỉnh nha trong quá trình điều trị với các dụng cụ chỉnh răng để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển động răng nhỏ phía trước. Ống ngậm SureSmile VPro được thiết kế để sử dụng với Thiết bị rung SureSmile VPro.

2. CẤU TẠO

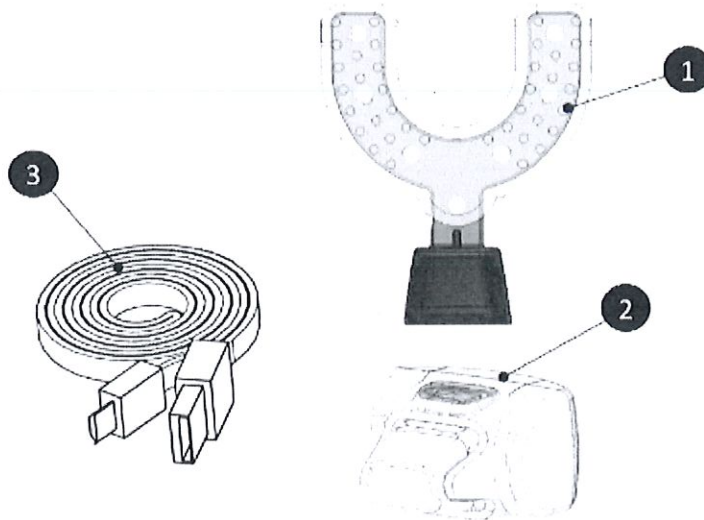

- 1 MOUTHPIECE
- 2 VIBRATION DEVICE
- 3 CHARGING CABLE

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không sử dụng thiết bị rung nếu bạn bị hội chứng chóng mặt hoặc khớp thái dương hàm (TMJ) để tránh các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt và đau nhức vùng mặt liên quan đến các rối loạn này.
- Không sử dụng bất kỳ Thuốc chống viêm không Steroid (NSAID) nào trong quá trình điều trị để tránh ức chế sự di chuyển của răng chỉnh nha.
- Không sử dụng thiết bị rung nếu bạn đang mang thai.

4. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Chỉ sử dụng thiết bị rung theo hướng dẫn của bác sĩ lâm sàng. Ngừng sử dụng thiết bị và hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn cảm thấy nhạy cảm với rung động hoặc nếu bạn bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó chịu hoặc đau.
- Không sửa đổi thiết bị rung. Bất kỳ sửa đổi nào có thể làm giảm chức năng của thiết bị.



- Thiết bị rung có thể không thích hợp để sử dụng cùng với một số phục hình nha khoa nhất định. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Thiết bị rung không được khuyến khích cho những bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh nha chu.
- Ngừng sử dụng thiết bị rung nếu thiết bị chỉnh nha của bạn bị hỏng.
- Điều quan trọng là phải đọc Hướng dẫn Sử dụng SureSmile VPro trước khi vận hành để sử dụng, bảo trì và chăm sóc đúng cách.
- Thiết bị rung và ống ngậm được thiết kế để tái sử dụng.
- Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra thiết bị, ống ngậm và bao bì để xác minh rằng không có thiệt hại nào xảy ra do vận chuyển và xử lý. Không sử dụng các sản phẩm đã bị hư hỏng.
- Luôn sạc lại thiết bị rung theo Hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng. Không bao giờ sử dụng thiết bị khi đã cắm vào nguồn điện. Tham khảo phần SẠC.
- Không bao giờ sử dụng bất kỳ nguồn điện hoặc dụng cụ thay thế nào khác cùng với thiết bị rung. Chỉ sử dụng nguồn điện có đầu ra nhỏ hơn hoặc bằng 5V 1A
- Không sử dụng thiết bị rung để làm sạch hoặc đánh răng để tránh bất kỳ dịch chuyển răng không mong muốn nào.
- Chỉ sử dụng thiết bị rung theo hướng dẫn của bác sĩ lâm sàng.
- Thiết bị rung không chống thấm nước, không sử dụng gần vòi nước chảy hoặc làm ướt thiết bị. Có thể làm sạch ống ngậm bằng nước theo hướng dẫn trong phần VỆ SINH. Không để ống ngậm tiếp xúc với nước quá nóng để tránh làm hỏng ống ngậm.
- Không cho ống ngậm vào máy rửa bát để tránh làm hỏng ống ngậm.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kiểm tra và làm sạch trước khi sử dụng. Rửa sạch ống ngậm dưới nước trước khi sử dụng lần đầu. Tham khảo phần CÁCH THÁO ỐNG NGẬM để biết cách tách ống ngậm khỏi thiết bị rung.

2. Sạc đầy thiết bị rung trước khi sử dụng lần đầu. Tham khảo phần SẠC.

3. Kết nối ống ngậm với thiết bị rung. Đảm bảo rằng thiết bị rung cảm thấy an toàn và ổn định trước khi đưa ống ngậm vào miệng.

4. Thiết bị rung được sử dụng trong khi các thiết bị chỉnh nha ở trong miệng của bạn.

5. Nhấn nút nằm trên thiết bị rung để kích hoạt phiên rung.

6. Thiết bị rung được thiết kế để sử dụng tổng cộng 5 phút mỗi ngày trong một phiên duy nhất. Thiết bị rung sẽ hoạt động trong 5 phút mỗi lần sử dụng và sẽ tự động tắt sau đó.

7. Vệ sinh ống ngậm sau khi sử dụng và sạc pin nếu cần. Tham khảo phần SẠC và VỆ SINH. Bảo quản thiết bị rung và ống ngậm ở nhiệt độ phòng.

CÁCH THÁO ỐNG NGẬM

- Giữ thiết bị rung theo cách nút hướng về phía bạn.

- Đẩy ống ngậm xuống trong khi giữ thiết bị rung tại chỗ để tháo

LÀM SẠCH

Ống ngậm phải được làm sạch sau mỗi lần sử dụng điều trị. Tháo ống ngậm khỏi thiết bị rung. Rửa sạch ống ngậm dưới nước và chải bằng bàn chải đánh răng nếu cần. Cáp sạc USB và Thiết bị Rung SureSmile VPro phải được giữ KHÔ.

SẠC

Sạc thiết bị rung bằng cách kết nối cáp sạc với nguồn điện USB. Đảm bảo rằng đầu ra của nguồn điện nhỏ hơn hoặc bằng 5V 1A. Thiết bị sẽ nhấp nháy màu xanh lam liên tục khi thiết bị đang sạc. Thiết bị sẽ phát ra ánh sáng xanh liên tục khi quá trình sạc hoàn tất. Thiết bị rung sẽ nhấp nháy màu đỏ liên tục khi sắp hết pin. Thiết bị rung sẽ không rung khi đang sạc. Thời gian sạc khuyến nghị là mỗi tuần một lần. Thiết bị rung được cấp nguồn bên trong (3,7 VDC) bằng bộ pin lithium-ion polymer có thể sạc lại. Không bao giờ sử dụng thiết bị khi đã cắm vào nguồn điện.

