

Giấy chứng nhận hồ sơ số: Hồ sơ sản xuất thuốc và thực phẩm Gan Hong số 20170023

Nộp hồ sơ số: Chuẩn bị Gan Hong số 2110044



Đèn khám bệnh Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ cẩn thận để tham khảo sau này.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NANCHANG MICARE

Nội dung

1. Mô tả Sản phẩm	1
2. Mục đích sử dụng.....	1
3. Đặc điểm kỹ thuật	1
4. Cảnh báo an toàn.....	1
5. Thành phần.....	2
6. Lắp đặt và sử dụng.....	6
7. Phân tích lỗi và giải pháp.....	16
8. Bảo hành và dịch vụ.....	16
9. Danh sách đóng gói.....	17

1. Mô tả sản phẩm

Sản phẩm bao gồm nguồn sáng, khung ánh sáng .v.v. Sản phẩm có thể được sử dụng như đèn kiểm tra hoặc cho hoạt động nhỏ riêng biệt.

2. Mục đích sử dụng

Sản phẩm được sử dụng trong phòng phẫu thuật và phòng trị liệu để thực hiện chiếu sáng một phần cho khu vực khám hoặc phẫu thuật của bệnh nhân.

3. Đặc điểm kỹ thuật

Điện áp đầu vào: 100-240V ~ 50 / 60Hz Màu

Chỉ số kết xuất Ra: $85 \leq Ra \leq 100$ Màu

Nhiệt độ: $30,00K \leq T_c \leq 7.000K$

Đường kính trường ánh sáng tối đa trong khoảng cách 420mm: Tối đa 600mm.

Độ rọi trung tâm trong tối đa trong 420mm:
 $\leq 100.000\text{lux}$

4. Thông tin an toàn

Không sử dụng ngoài mục đích sử dụng.

Không tháo rời nên không được phép. Trong trường hợp có sự cố hoặc bất thường phải ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

Vui lòng tắt nguồn trước khi cài đặt, để tránh bị điện giật.

Không sử dụng thiết bị trong khu vực có nguy cơ cháy nổ (ví dụ: môi trường bão hòa oxy hoặc gây mê)

Không kéo mạnh hoặc uốn cong đầu nối, dây nguồn và phích cắm vì sẽ dễ bị lỏng.

Hạn chế tối đa rung trong quá trình cài đặt và vận chuyển.

Khi phát hiện bất thường hoặc lỗi, phải ngay lập tức ngừng sử dụng và rút dây nguồn.


Không làm trầy xước ống kính với các vật cứng và giữ vệ sinh ống kính

Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi góc hoặc dây nguồn để tránh các thiệt hại ngoài ý muốn.


Đóng các công tắc nguồn trên sản phẩm sau mỗi lần sử dụng và rút dây nguồn.

Khi làm sạch sản phẩm này, vui lòng sử dụng cồn hoặc chất tẩy rửa trung tính để lau cẩn thận. Trước khi làm sạch và bảo trì sản phẩm này, đừng quên rút dây nguồn khỏi ổ cắm mạng điện.


5. Cấu tạo

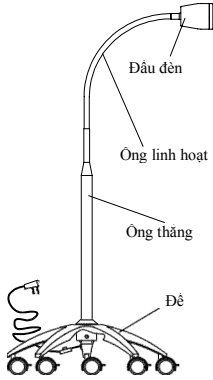


□JD1000L

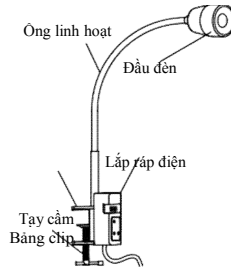


□JD1000J

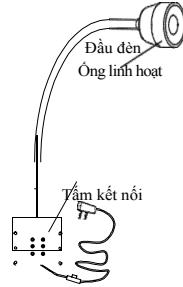



□JD1000G

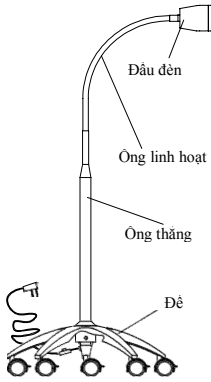


□JD1100

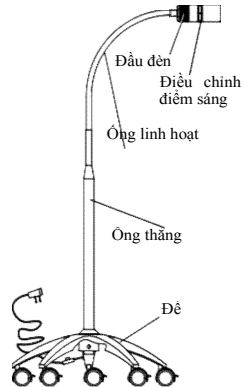


□JD1100L

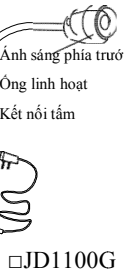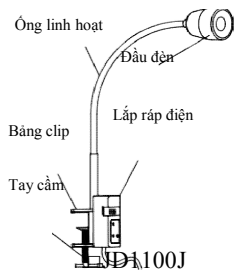


□JD1100G

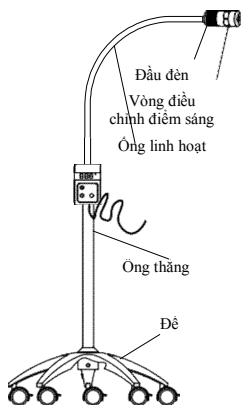


□JD1200L

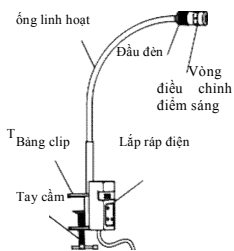


□JD1200J

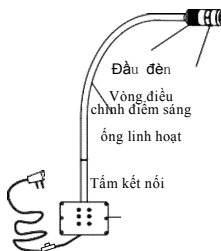


□JD1200G

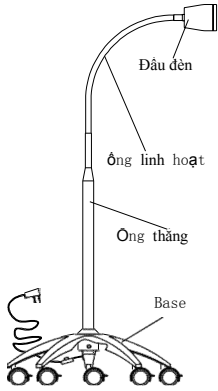


□JD1300L

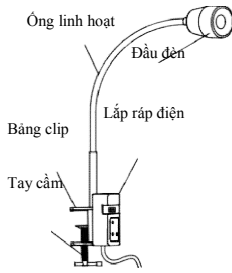


□JD1300J

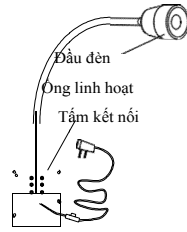


□JD1300G

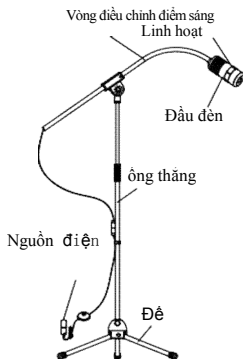


□JD1400L

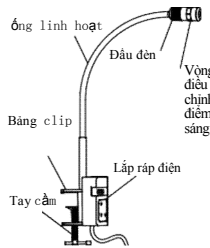


□JD1400J

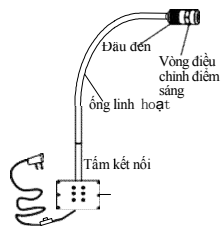


□JD1400G

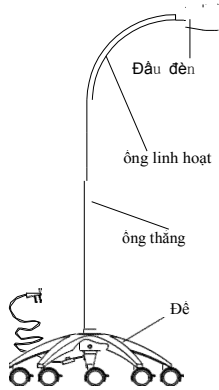


□JD1500

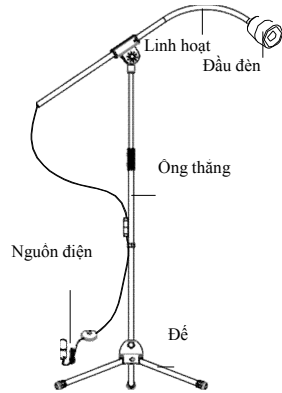


□JD1500L

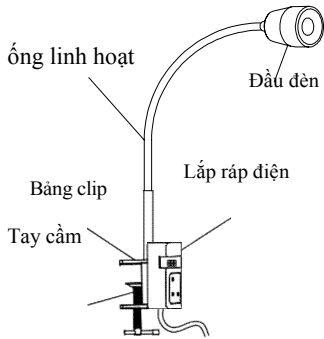


□JD1500J

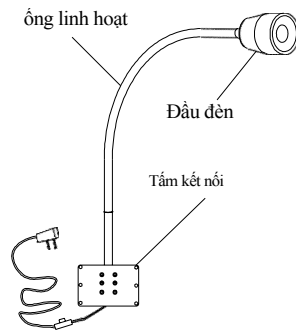


□JD1500G

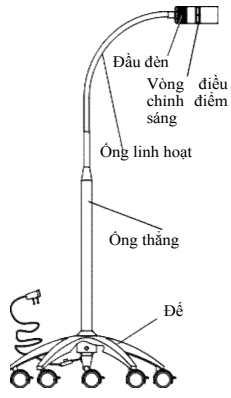

□JD1600L

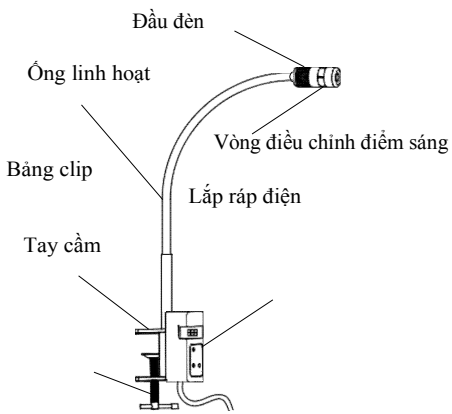


□JD1600J

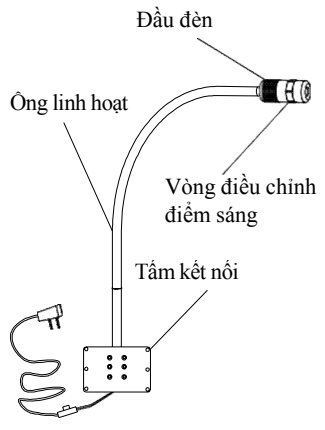

□JD1600G


6. Lắp đặt và sử dụng

□JD1000L □JD1100 □JD1300L □JD1500

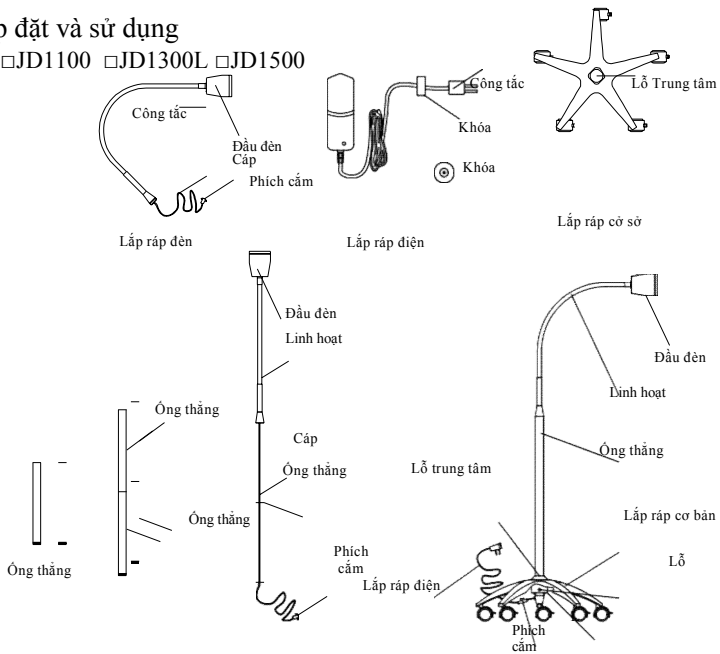

Phương pháp sử dụng:


1. Kết nối ống đứng; cáp phần đầu đèn đi qua đầu nối ống nước đứng.
2. Chèn đầu ra của ống đứng vào lỗ trung tâm của đế.
3. Kết nối đầu nối dây của cụm nguồn và đầu nối đèn.
4. Vặn các đai ốc khóa trên cụm nguồn vào đầu ra của ống đứng và siết chặt nó.
5. Lỗ vít cho lắp ráp cơ sở, siết ốc vít.
6. Kết nối nguồn điện và bật công tắc nguồn trên đầu đèn.

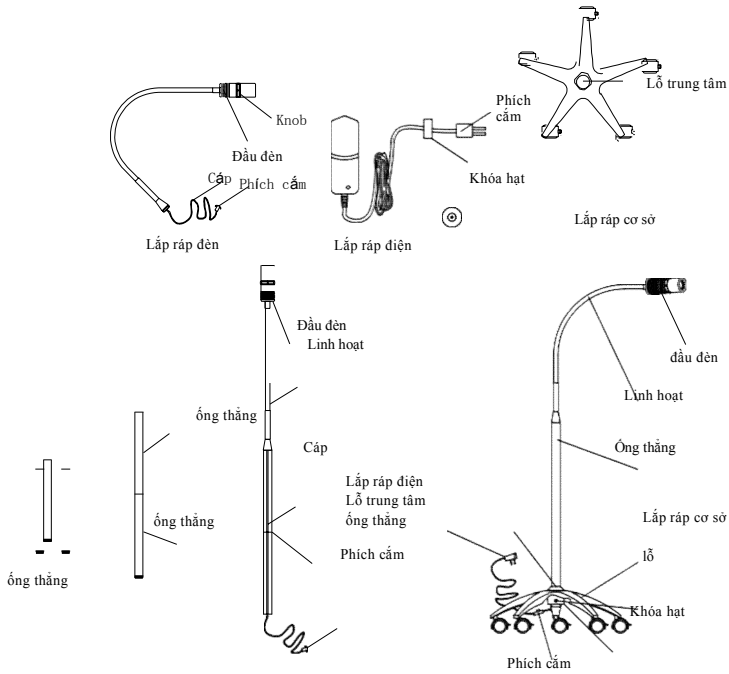

Phương pháp sử dụng:


1. Kết nối ống đứng; cáp phần đầu đèn đi qua đầu nối ống nước đứng.
2. Chèn đầu ra của ống đứng vào lỗ trung tâm của đế.
3. Kết nối đầu nối dây của cụm nguồn và đầu nối đèn.
4. Vận đai ốc kim loại trên cụm nguồn vào đầu ra của ống đứng và vận chặt.
5. Lỗ vít cho lắp ráp cơ sở, siết ốc vít.
6. Kết nối nguồn điện và bật công tắc nguồn trên đầu đèn.
7. Điều chỉnh trung tâm trường ánh sáng cần thiết bằng núm.

□JD1100L □JD1200L □JD1300L □JD1500L □JD1600L

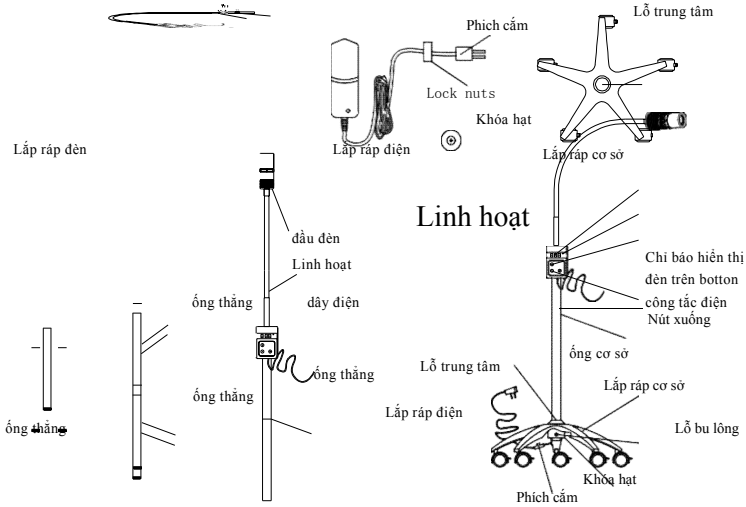


Phương pháp sử dụng:

1. Kết nối ống đứng; cáp phần đầu đèn đi qua đầu nối ống nước đứng.
2. Chèn đầu ra của ống đứng vào lỗ trung tâm của đế.
3. Vít lỗ cho lắp ráp cơ sở, siết ốc vít.
4. Điều chỉnh góc của ống kim loại mềm, đặt đầu đèn đến vị trí thích hợp, nhấn công tắc nguồn và khu vực chỉ báo hiển thị kỹ thuật số hiển thị bình thường.
5. Điều chỉnh độ sáng cần thiết bằng cách tăng nút chỉ báo hoặc làm yếu nút chỉ thị và hiển thị đồng bộ hóa kỹ thuật số.
6. Điều chỉnh trung tâm trường ánh sáng cần thiết bằng nút.

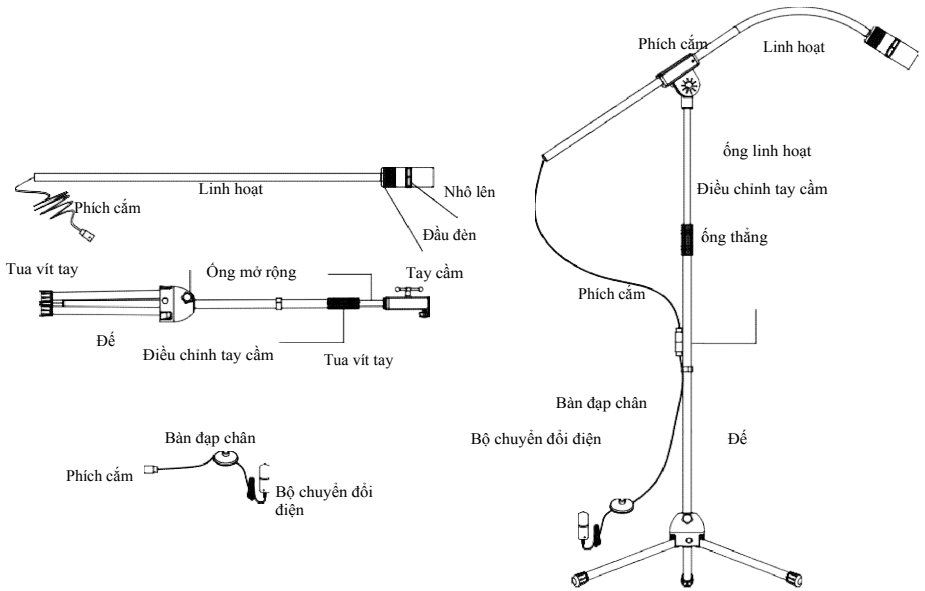


Phương pháp sử dụng:

1. Mở chân đỡ, đặt nó xuống đất, kéo ống đứng lên và vặn ốc bằng tay theo chiều kim đồng hồ.
2. Đẩy ống qua kết nối máy nâng và vặn tay cầm bằng tay theo chiều kim đồng hồ.
3. Mô-đun nguồn điện được kết nối với đầu nối ống, bộ chuyển đổi được cắm vào ổ cắm điện và nguồn điện được kết nối bằng cách nhấn nút chuyển đổi chân.
4. Xoay tay cầm điều chỉnh theo chiều ngược kim đồng hồ, điều chỉnh chiều cao của ống mở rộng lên xuống vị trí thích hợp, sau đó xoay tay cầm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ cho đến khi siết chặt.
5. Điều chỉnh đường kính điểm yêu cầu bằng núm.

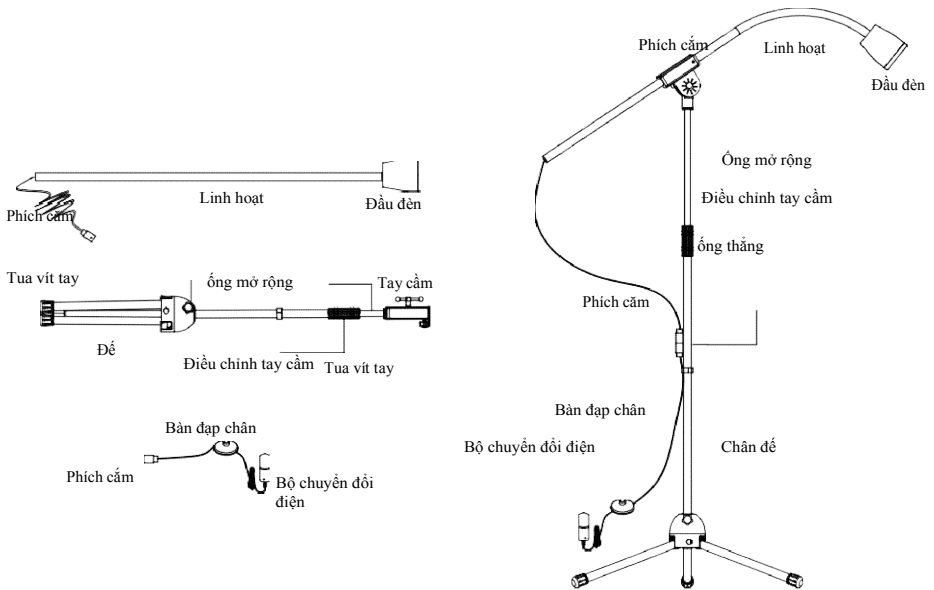


Phương pháp sử dụng:

1. Mở chân đỡ, đặt nó xuống đất, kéo ống đứng lên và vặn ốc bằng tay theo chiều kim đồng hồ.
2. Đẩy ống qua kết nối máy nâng và vặn tay cầm bằng tay theo chiều kim đồng hồ.
3. Mô-đun nguồn điện được kết nối với đầu nối ống, bộ chuyển đổi được cắm vào ổ cắm điện và nguồn điện được kết nối bằng cách nhấn nút chuyển đổi chân.
4. Xoay tay cầm điều chỉnh theo chiều ngược kim đồng hồ, điều chỉnh chiều cao của ống mở rộng lên xuống vị trí thích hợp, sau đó xoay tay cầm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ cho đến khi siết chặt.

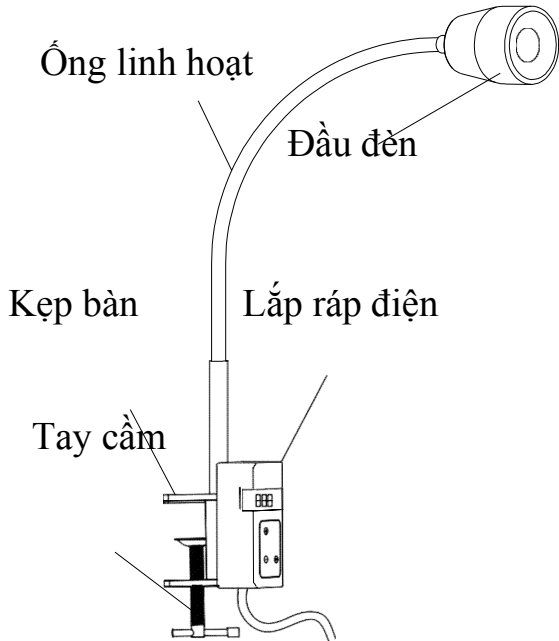


Phương pháp sử dụng:

1. Xoay tay cầm ngược chiều kim đồng hồ, tăng khoảng cách giữa kẹp bảng và tay cầm đến vị trí có thể kẹp vào bàn, sau đó xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ đến khi cố định trên bàn.
2. Bật nguồn điện, nhẹ nhàng kéo giá đỡ đèn sang đúng vị trí, nhấn công tắc nguồn và hiển thị vùng chỉ báo.
3. Điều chỉnh độ sáng cần thiết bằng cách tăng nút chỉ báo hoặc làm yếu nút chỉ thị và hiển thị đồng bộ hóa kỹ thuật số.

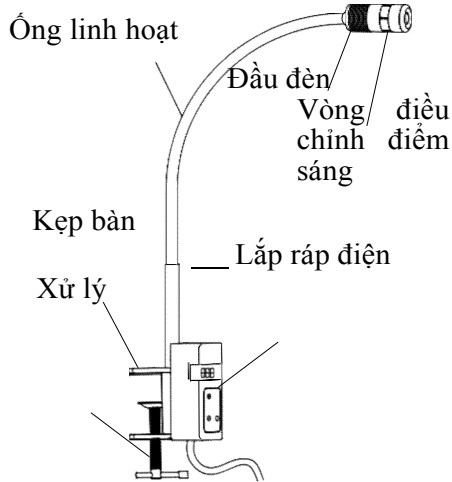


Phương pháp sử dụng:

1. Xoay tay cầm ngược chiều kim đồng hồ, tăng khoảng cách giữa kẹp bàn và tay cầm đến vị trí có thể kẹp vào bàn, sau đó xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ. Cho đến khi kẹp được cố định trên bàn.
2. Bật nguồn điện, nhẹ nhàng kéo giá đỡ đèn sang đúng vị trí, nhấn công tắc nguồn và hiển thị vùng chỉ báo.
3. Điều chỉnh độ sáng cần thiết bằng cách tăng nút chỉ báo hoặc làm yếu nút chỉ thị và hiển thị đồng bộ hóa kỹ thuật số.
4. Kích thước điểm có thể được điều chỉnh thông qua nút điều chỉnh điểm.

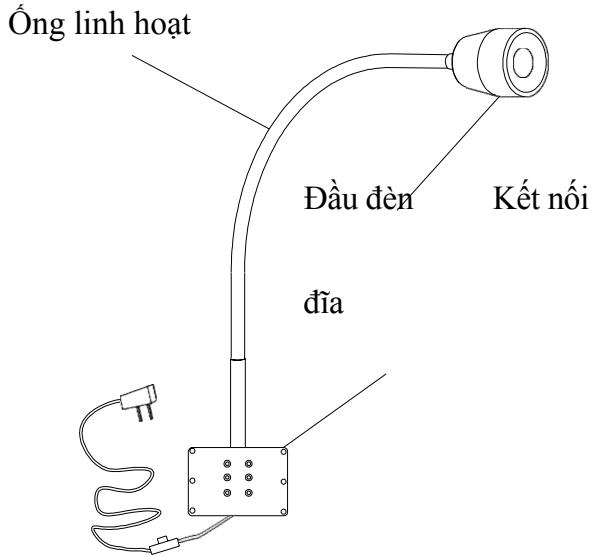

Phương pháp sử dụng:

1. Cố định sản phẩm trên tường theo vị trí lỗ của tấm kết nối.
2. Nhấn nút nguồn để bật nguồn.
3. Điều chỉnh góc vòi và điều chỉnh giá đỡ đèn đúng vị trí.

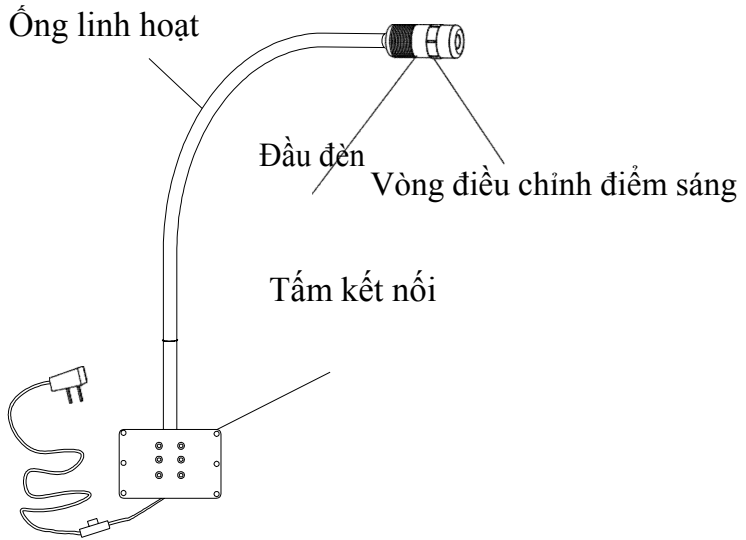

Phương pháp sử dụng:

1. Cố định sản phẩm trên tường theo vị trí lỗ của tấm kết nối.
2. Nhấn nút nguồn để bật nguồn.
3. Điều chỉnh góc vòi và điều chỉnh giá đỡ đèn đúng vị trí.
4. Xoay núm trên giá đỡ đèn để điều chỉnh vị trí cho đúng kích thước.

7. Khắc phục sự cố và bảo trì

Hiện tượng thất bại	Xác nhận	Giải pháp
Cắm điện, đèn báo nguồn không sáng.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiếp xúc kém 2. Mất điện 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chèn lại để đảm bảo tiếp xúc tốt. 2. Vui lòng thông báo cho nhà sản xuất để thay đổi nguồn điện hoặc thay thế kịp thời các bộ phận.
Nhấn công tắc nguồn, đèn báo nguồn bật, điều chỉnh nút tăng cường, nhưng đèn không sáng.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hư hỏng bảng mạch điện 2. Hư hỏng bóng đèn 	Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất kịp thời, cử nhân viên chuyên nghiệp thay thế hoặc gửi lại cho nhà sản xuất để thay thế.

8. Bảo hành và dịch vụ

Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin, vui lòng liên hệ với đường dây dịch vụ hậu mãi Micare 86-0791-82095766

Điều khoản bảo hành

(1) Thời gian bảo hành là 12 tháng sau khi bán sản phẩm và dịch vụ bảo hành được thực hiện bằng thẻ bảo hành.

(2) Trong thời gian bảo hành, trong sử dụng bình thường, các sự cố do chất lượng của chính sản phẩm có thể được cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí bằng hóa đơn bảo hành và hóa đơn mua hàng.

(3) Lỗi sau khi tháo gỡ, sửa đổi hoặc các chức năng khác không được bảo hành miễn phí nếu không được công ty đồng ý. Nếu thiệt hại là do rơi, đùn, ngâm, ẩm ướt hoặc các lý do khác của con người hoặc các lý do khác, nó không được bảo hành miễn phí.

(4) Dịch vụ bảo hành miễn phí sẽ không được cung cấp nếu loại, số và ngày giao hàng được chỉ định trên sản phẩm bị thay đổi, xóa, di chuyển hoặc không thể nhận ra.

Trong trường hợp yêu cầu bảo hành, vui lòng cung cấp các thông tin sau cùng với bằng chứng mua hàng:

Tên _____ địa chỉ _____

Điện thoại _____ Mã bưu điện _____

Mua từ: _____

9. Danh sách đóng gói

Loại	Lắp ráp	Số lượng
Theo chiều dọc	Lắp ráp đèn	1 cái
	Lắp ráp ống thẳng	2 cái
	Lắp ráp cơ sở	1 cái
	Lắp ráp cung cấp điện	1 cái
	Cờ lê Allen	1 cái
	Hướng dẫn sử dụng	1 cái
	Thẻ bảo hành	1 cái
	Chứng chỉ	1 cái
Bảng clip	Đèn khám	1 cái
	Hướng dẫn sử dụng	1 cái
	Thẻ bảo hành	1 cái
	Chứng chỉ	1 cái
Treo tường	Đèn khám	1 cái
	Bu-lông mở rộng	4 cái
	Hướng dẫn sử dụng	1 cái
	Thẻ bảo hành	1 cái
	Chứng chỉ	1 cái

Địa chỉ của người đăng ký:

Số 16, số 666 phía tây Yaohu đường 5, thị trấn Trường Đông, Khu phát triển công nghệ cao Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc

Công ty dịch vụ sau bán hàng: Công ty TNHH thiết bị y tế Nanchang Micare

Địa chỉ dịch vụ hậu mãi: Số 16, số 666 phía tây Yaohu đường 5, thị trấn Trường Đông, Khu phát triển công nghệ cao Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc 16

Điện thoại dịch vụ sau bán hàng: + 86-791-

82095766 Điện thoại: + 86-791-88127989