

Khẩu Trang Y Tế

ECO-LIFE 高品質のマスク




Sản xuất tại Việt Nam.



ECO-LIFE 高品質のマスク CE FDA

ĐỨC HUY
ISO 9001: 2015

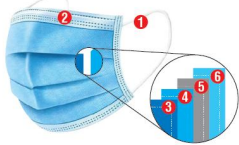

4 Lớp - Dùng 1 lần *

Lọc hiệu quả bụi bẩn và vi khuẩn

- ★ Dây đeo.
- ★ Thanh kẹp mũi.
- ★ 2 lớp vải không dệt lọc bụi.
- ★ Lớp màng lọc vi khuẩn.
- ★ Lớp vải không dệt tạo thẩm mỹ.



Sản xuất tại Việt Nam.

50 CẶP HỘP

LSX:
HSX:
HSD:

ECO-LIFE 高品質のマスク

Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp - Dùng 1 lần

Khẩu TRANG Y TẾ ECO-LIFE ngăn ngừa khói, không khí ô nhiễm, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, sử dụng hiệu quả trong môi trường y tế, khi bầu không khí ô nhiễm, các công trình xây dựng, môi trường công nghiệp...

THÀNH PHẦN:

1. Dây thun mềm, độ đàn hồi tốt.
2. Thanh kẹp mũi mềm, dễ uốn cong.
3. 2 lớp vải không dệt lọc bụi.
4. Lớp màng lọc vi khuẩn.
5. Lớp vải không dệt tạo thẩm mỹ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:

- Hướng Dẫn Sử Dụng: Kéo dây đeo ra, đặt khẩu trang lên mắt, kéo dây vòng qua tai.
- Giữ kín kẹp mũi với sát khuôn mặt, kéo dây dưới khẩu trang cho kín.
- BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, thoáng mát, không ẩm ướt bụi bẩn, và hạn chế 45 cm.
- (Lưu ý: 40°C hoặc 100°F).
- TRƯỜNG TIN CẢM BẢO AN TOÀN:
- Sản phẩm sử dụng 1 lần, tránh xa khu vực có lửa hoặc nguy cơ bắt lửa, tránh xa lửa tự nhiên.
- Sau khi sử dụng, bỏ CHỈ ĐẢI ĐÓNG nơi quy định.
- Không sử dụng trong trường hợp sản phẩm bị rách và không còn nguyên vẹn.
- Hạn sử dụng: 1 năm kể ngày sản xuất.
- Ngày sản xuất: xem trên bao bì sản phẩm.
- Số hàng: 04/cặp.
- Kích thước: 175mm x 95mm (LxĐ)
- Số lô sản:


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY

ĐC: AN177 TRẦN ĐẠI NGHĨA, XÃ TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM
ĐT: 028.39555.868 - Fax: 028.39555.867 - 028.333.888
Email: khastrangytedechuy@gmail.com
Website: khastrangytedechuy.vn



ECO-LIFE 高品質のマスク CE FDA

ĐỨC HUY
ISO 9001: 2015

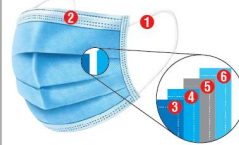

4 Layers - 1 Time use *

Dust and microbial resistant

- ★ Strap.
- ★ Nose clip.
- ★ 2 layers of non-woven dust infiltration fabric.
- ★ A layers of microbial filter.
- ★ A layers of fashionable non-woven fabric.



Made in Vietnam

50 PCS BOX

ECO-LIFE 高品質のマスク

Medical Masks 4 Layers - 1 Time use

ECO LIFE MEDICAL FACE MASK helps prevent smoke, dust, air pollution and virus from entering to your body. It can be used efficiently on roads, construction sites, healthcare and industrial environments.

INGREDIENTS:

1. Soft and elastic rubber band.
2. Flexible nasal wire.
3. 2 layers of non-woven dust infiltration fabric.
4. 1 layer of microbial filter.
5. 1 outside layer of fashionable non-woven fabric.

INSTRUCTION:

- Hold the mask by the ear loops.
- Place the loops around your ears.
- Bend or pinch the stiff edge to the shape of your nose.
- Pull the bottom of the mask over your mouth and chin.
- PRESERVATION: Place the mask in dry, dust and high temperature free environment (over 40°C or 100°F).
- WARNING: Only use the mask once.
- Keep away from places of a high risk of catching fire.
- Keep out of children's reach.
- Dispose the mask appropriately.
- Do not use the product if it is torn or not in its original form.
- Expiry date: 5 years after manufactured date.
- Manufactured date: On the package.
- 50 masks per load.
- Size: 175 mm X 95 mm (LxĐ)
- Circulation number:

ĐỨC HUY DEVELOPMENT PRODUCTION LTD.,CO

ADDRESS: AN177 Tran Dai Nghia Street, Tan Nhut Commune, Binh Chanh District, HCM City
TEL: 028.39555.868 - Fax: 028.39555.867 - 028.333.888
Email: khastrangytedechuy@gmail.com
Website: khastrangytedechuy.vn

