


Tên trang thiết bị y tế: **Trang thiết bị chẩn đoán In-vitro - Dung dịch rửa máy hằng ngày**


- **Chủng loại:** Daily Cleaning Solution
- **Mã sản phẩm:** 17470/71
- **Quy cách đóng gói:** 1 x 100 ml

Daily Cleaning Solution (dung dịch rửa hằng ngày dùng cho máy phân tích điện giải) là các vật tư tiêu hao để bảo trì bảo dưỡng thiết bị phân tích HumaLyte Plus 3 và HumaLyte Plus 5

Sử dụng Daily Cleaning Solution sau khi làm xét nghiệm với mẫu máu toàn phần và mẫu lipid. Đối với Daily Cleaning Solution, sử dụng tùy chọn "Deprotein" trong menu "Service"- "Cleaning". Quy trình rửa này chỉ tốn vài phút và tương tự cho cả 3 loại dung dịch, và được tự động thực hiện bởi thiết bị phân tích khi chọn tùy chọn tương ứng trên màn hình "Cleaning". Tiêu hao dung dịch được thể hiện ở bảng dưới. Màn hình "Cleaning":

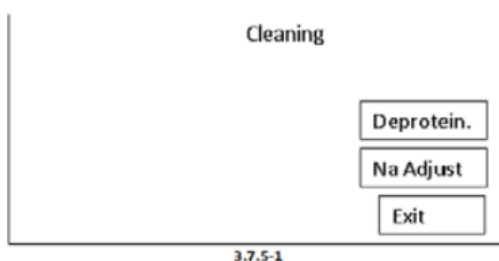

Đối với hệ thống hút mẫu tự động, dung dịch rửa được đặt vào vị trí "Calib" trên khay chứa mẫu. Đối với Daily Cleaning Solution, chọn "Deprotein". Chọn "Deprotein" để hiển thị tùy chọn "Aspirate" trên màn hình. Đặt dung dịch rửa vào dưới kim hút mẫu. Chọn "Aspirate" để kim hút dung dịch vào trong thiết bị. Sau khi hút, "Aspirate" sẽ biến mất và con số phần trăm thể hiện tiến trình rửa sẽ hiện ra như sau:

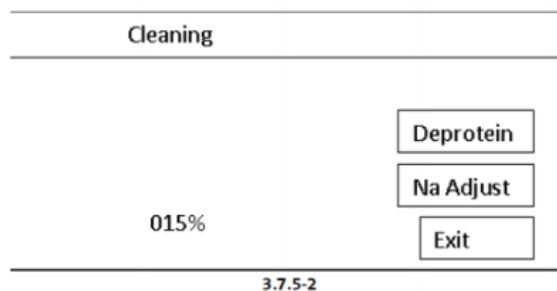

Toàn bộ tiến trình kéo dài trong khoảng 5 phút.

Sản phẩm	Tiêu hao
Daily Cleaning Solution	1300 µl cho một chu kỳ rửa

Nếu không sử dụng thiết bị phân tích trong hơn một tuần, cần tháo hết dung dịch trong máy ra. Kéo nhẹ Reagent Pack ra khoảng 2 cm và thực hiện chương trình hiệu chuẩn "STD" (tùy chọn "STD" trên menu chính). Thiết bị phân tích sẽ hút không khí thay vì dung dịch chuẩn từ Reagent Pack, nhờ đó đẩy hết dung dịch trong hệ thống.

DAILY CLEANING SOLUTION

Package Size

[REF] 17470/71 100 ml DAILY CLEANING SOLUTION

[IVD]

Intended Use

Daily Cleaning Solution is used for automatically performed and manually programmed cleaning procedures on the HumaLyte Plus 3 and HumaLyte Plus 5.

For cleaning procedures please refer to the user manuals for HumaLyte Plus 3 [REF] 17470/10 and HumaLyte Plus 5 [REF] 17470/20

Contents

DAILY Cleaning Solution is filled in plastic vials, closed with white screw caps, labelled

Cat.-no. / Product Name:	17470/71 / Daily Cleaning Solution
Aggregate state	liquid
Appearance	colourless
Density	Approx. 1 g/ml
Smell	None
pH	6.9
Chemical constituents	< 1% Pepsin < 1% Trypsinase < 1% Papain

Preparation

Daily Cleaning Solution is ready for use and can directly be applied on the HumaLyte Plus 3 and HumaLyte Plus 5.

Storage and Stability

Daily Cleaning Solution is stable 24 months from manufactured date and up to the stated expiry date if stored at 5...35°C. After opening the stability is within 12 months.

Precautionary statements

P234 Keep only in original container.

P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

P281 Use personal protective equipment as required.

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P401 Store in accordance with local/regional/national/international regulations.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/ regional/ national/ international regulations.

DAILY CLEANING SOLUTION

Đóng gói

[REF] 17470/71 100 ml DAILY CLEANING SOLUTION

[IVD]

Chỉ định sử dụng

Dung dịch Vệ sinh Hàng ngày được sử dụng cho các quy trình làm sạch được thực hiện tự động và lập trình thủ công trên HumaLyte Plus 3 và HumaLyte Plus 5.

Để biết quy trình thực hiện, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cho HumaLyte Plus 3 [REF] 17470/10 và HumaLyte Plus 5 [REF] 17470/20

Thành phần

Dung dịch Vệ sinh Hàng ngày được đựng trong các lọ nhựa, được đóng bằng nắp vận màu trắng, có dán nhãn

Mã số / Tên sản phẩm:	17470/71 / Daily Cleaning Solution
Trạng thái tổng hợp	dung dịch
Màu sắc	không màu
Nồng độ	Khoảng 1 g/ml
Mùi	Không
pH	6.9
Thành phần hóa học	< 1% Pepsin < 1% Trypsinase < 1% Papain

Chuẩn bị

Dung dịch Vệ sinh Hàng ngày đã sẵn sàng để sử dụng và có thể được áp dụng trực tiếp trên HumaLyte Plus 3 và HumaLyte Plus 5.

Bảo quản và ổn định

Dung dịch Vệ sinh Hàng ngày ổn định trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất và đến hạn sử dụng đã nêu nếu được bảo quản ở 5 ... 35°C. Sau khi mở nắp ổn định trong 12 tháng.

Lưu ý phòng ngừa

P234 Chỉ giữ trong hộp đựng ban đầu.

P260 Không hít bụi / khói / khí / sương / hơi / phun.

P262 Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo.

P281 Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân theo yêu cầu.

P303 + P361 + P353 NẾU DÍNH VÀO DA (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen.

P305 + P351 + P338 NẾU VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ tháo. Tiếp tục xả.

P337 + P313 Nếu vẫn tiếp tục bị kích ứng mắt: Nhận tư vấn / chăm sóc y tế.

P401 Lưu trữ phù hợp với các quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.

P501 Vứt bỏ nội dung / thùng chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.

DCS

INF17470/71 GB-VN 05-2020-15

Human