




neodisher® PreStop



Hóa chất chống ăn mòn trong tiền xử lý dụng cụ phẫu thuật.

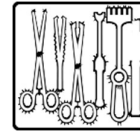

Bột xịt

Phạm vi ứng dụng:

- Hóa chất chống ăn mòn xịt trực tiếp lên dụng cụ phẫu thuật trong phòng mổ ngay sau khi sử dụng.

Tác dụng:

- Chất chống ăn mòn: ngăn chặn sự tạo rỗ trên bề mặt dụng cụ thép không gỉ gây ra bởi chất bẩn bám chắc do máu hoặc dịch sinh lý
- Tiền xử lý ngay trong phòng mổ
- Thích hợp cho các dụng cụ phẫu thuật bao gồm cả dụng cụ MIS
- Nhôm anod hóa cần được kiểm tra độ tương thích trước khi sử dụng

Đặc tính nổi bật:

- Ngăn chặn vết bẩn đông khô trên dụng cụ bằng cách giữ ẩm
- Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm sạch tiếp theo
- Ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật trên dụng cụ trong suốt gian tiếp xúc (kim khuẩn)

Ứng dụng và liều:

neodisher PreStop không cần pha loãng mà xịt trực tiếp bột lên dụng cụ trong hộp ngay sau ca phẫu thuật; đảm bảo giữ ẩm tuyệt đối. Hộp phải được đóng kín. Dụng cụ sau khi xử lý với PreStop có thể bảo quản trong 72 giờ. Sau đó xả cẩn thận và tiến hành tái xử lý như bình thường.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chỉ dành cho người có chuyên môn.
- Để sử dụng neodisher PreStop, cần gắn vòi xịt đi kèm trong hộp.
- Không được trộn lẫn với sản phẩm khác.

- neodisher PreStop cần được xả với nước (nên dùng nước khử ion).
- Quá trình tái xử lý cần tuân thủ tất cả các sắc lệnh theo quy định về thiết bị y tế và cần được thực hiện dựa trên quy trình đã được phê duyệt.
- Vui lòng tuân thủ các khuyến nghị tái xử lý của các nhà sản xuất thiết bị y tế theo yêu cầu DIN EN ISO 17664.

Thông số kỹ thuật:

pH	9.5 (không pha loãng, 20 °C)
Độ nhớt	Xấp xỉ.. 1.0 g/cm ³ (20 °C)

Thành phần:


< 5 % chất điện hoạt anion và lượng tính cùng enzyme, chất bảo quản (3-Iodo-2-propinyl butylcarbamate, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one)

Chứng nhận CE:

neodisher PreStop tuân thủ các hướng dẫn của Châu Âu về thiết bị y tế.

Nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng với sản phẩm, hãy báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan chức năng quốc gia có liên quan.

Điều kiện bảo quản:

Luôn bảo quản ở nhiệt độ từ 0 ° C đến 25 ° C. Đậy kín bình chứa. Tránh xa ánh sáng mặt trời. Có thể sử dụng trong 2 năm khi được bảo quản theo khuyến cáo. Để biết hạn sử dụng, tham khảo dấu tem trên nhãn phía sau biểu tượng đồng hồ cát .

Nguy hiểm và biện pháp:

neodisher PreStop không phải là chất độc dựa theo CLP-Regulation (EC) Số 1272/2008.

Chỉ vứt bỏ khi bình rỗng và đóng nắp. Để xử lý cặn bẩn của sản phẩm, xem Safety Data Sheet.



neodisher[®] PreStop

Để biết thêm thông tin an toàn, hãy xem
Safety Data Sheet. Được tìm thấy tại
www.drweigert.com ở mục
"Service/Downloads".

MB 4086/2-4 Ngày phát hành: 05/2020



With the above information, to our current knowledge we describe our product regarding safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.
