



Cold & Flu Relief

100% NATURAL RELIEF FROM NASAL SYMPTOMS OF THE COMMON COLD & FLU

HYPERTONIC SEA WATER SOLUTION

ALGOMER™
COMPLEX

+ EUCALYPTUS,
SPEARMINT & THYME

EN Sinomarin® Plus Algae Cold & Flu Relief with Algomer™ complex is a 100% natural spray that offers relief from nasal symptoms associated with the common cold and flu. Its unique –patent pending– formulation combines the natural decongestant action (osmosis effect*) of hypertonic sea water (2.3% NaCl) with the well-documented properties –beneficial to the nasal mucosa– of seaweed (algae) extracts** present in **Algomer™ complex**, in addition to the essential oils and extracts of Eucalyptus, Spearmint and Thyme. **Sinomarin® Cold & Flu Relief** cleanses the nasal cavities helping to eliminate infectious agents (mechanical action).

The seawater used in **Sinomarin® Cold & Flu Relief** is collected from Cancale Bay at the coast of Brittany in France. The area is well-known for its open seas and strong tidal currents, and provides sea water of outstanding quality, rich in the sea's mineral salts and trace elements. The sea water quality is continuously monitored by the French Research Institute for Exploitation of the Sea (IFREMER) under the auspices of the French Government.

Algomer™ complex is a unique combination of 100% natural ingredients extracted from *Undaria pinnatifida* and *Spirulina platensis* algae (seaweed). Both algae have long been used in Oriental medicine to promote health and treat multiple conditions, and are part of the Far-Eastern diet. Formulated specifically for nasal use, **Algomer™ complex** is composed of a blend of natural algae components, namely, phycocyanin and a series of polysaccharide complexes including fucoidans. These components form a protective layer that encapsulates, traps and prevents contact and/or entry of harmful external agents (e.g. viruses, bacteria, etc.) within the nasal mucosa, helping to relieve symptoms of the common cold and flu and strengthen its natural function. *Undaria pinnatifida* and *Spirulina platensis* algae are harvested from the most pristine waters of Patagonia in Argentina and Brittany in France, respectively, and are certified organic.

The essential oils of **Eucalyptus globulus** & **Mentha spicata** and **Thymus vulgaris** extract are rich in ingredients (e.g. 1,4-cineole, menthol, carvacrol, etc.) well-known for their benefits on the nasal mucosa and their ability to provide a refreshing sensation. **Sinomarin® Cold & Flu Relief** also contains **Glycerin** offering additional moisturizing properties to the irritated nasal mucosa. All components are 100% natural.

Sinomarin® Cold & Flu Relief can be used alone, as a natural alternative to medicated decongestants (local corticosteroids, antihistamines, vasoconstrictors), or in combination with them to help enhance their efficacy.

Properties:

- Relieves symptoms of the common cold & flu including nasal congestion, sinus pressure and runny nose.
- Fluidifies mucus secretions.
- Cleanses the nasal cavities removing mucus and mucus-trapped infectious agents (via mechanical action).
- Moisturizes the nasal mucosa and relieves nasal dryness.
- Helps promote natural recovery of the nasal mucosa.

Sinomarin® Cold & Flu Relief is recommended:

- For the natural relief of nasal symptoms associated with the common cold & flu (e.g. nasal congestion, runny nose) and in cases of rhinosinusitis.
- To eliminate infectious agents that may lead to secondary infections e.g. sinusitis, otitis (via mechanical action).
- In cases where medicated decongestants are contraindicated (e.g. high blood pressure, heart conditions, diabetes).
- To help enhance the efficacy of medicated decongestants.

Composition: Sea water (equivalent to 2.3% NaCl), Purified water, Algomer™ complex (*Undaria pinnatifida* & *Spirulina platensis* extracts), *Thymus vulgaris* extract, *Eucalyptus globulus* essential oil, *Mentha spicata* essential oil, Glycerin of vegetal origin, Propanediol.

Sinomarin® Cold & Flu Relief is free of drugs, preservatives and chemical additives. 100% natural.

FR Sinomarin® Plus Algae Cold & Flu Relief avec complexe Algomer™ est un spray 100% naturel qui soulage les symptômes nasaux associés au rhume et à la grippe. Sa composition unique –brevet en instance– allie l'action décongestionnante naturelle (par osmose*) de l'eau de mer hypertonique (2.3% NaCl) aux actions prouvées –bénéfiques sur la muqueuse nasale– offertes par les extraits des algues** du **complexe Algomer™** et par les huiles essentielles d'Eucalyptus, de Menthe verte et l'extrait de Thym. **Sinomarin® Cold & Flu Relief** nettoie les fosses nasales en facilitant l'élimination des agents infectieux (par action mécanique).

L'eau de mer utilisée dans **Sinomarin® Cold & Flu Relief** est prélevée en Bretagne, dans la baie de Cancale en France. Cette baie est connue pour ses fortes marées, qui provoquent un brassage perpétuel assurant ainsi la qualité de l'eau prélevée, riche en sels minéraux et oligo-éléments. L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) procède également à des contrôles réguliers de qualité sous les auspices du gouvernement français.

Le **complexe Algomer™** se compose d'un mélange unique à base d'ingrédients extraits des algues *Undaria pinnatifida* et *Spirulina platensis* 100% naturels. Ces algues sont utilisées depuis longtemps en médecine traditionnelle orientale afin de promouvoir la santé et traiter diverses maladies. De plus, on les retrouve dans de nombreux régimes de l'Extrême Orient. Conçu spécifiquement pour une utilisation nasale, le **complexe Algomer™** contient une combinaison d'ingrédients naturels extraits des algues, à savoir, la phycocyanine et une série de complexes de polysaccharides, dont les fucoidanes. Ces composants forment une couche protectrice qui encapsule, emprisonne et empêche le contact et/ou l'entrée d'agents externes nocifs (par exemple virus, bactéries, etc.) dans la muqueuse nasale, aidant ainsi à soulager les symptômes du rhume et de la grippe et renforçant sa fonction naturelle. Les algues *Undaria pinnatifida* et *Spirulina platensis* sont récoltées dans les eaux les plus pures, respectivement, de Patagonie en Argentine et de Bretagne en France, et sont certifiées bio.

Les huiles essentielles d'**Eucalyptus globulus** et de **Mentha spicata** et l'extrait de **Thymus vulgaris** contiennent de multiples ingrédients (comme le 1,4-cineole, le menthol, le carvacrol, etc.) bien connus pour leurs effets bénéfiques sur la muqueuse nasale ainsi que pour leur capacité à procurer une sensation de fraîcheur. **Sinomarin® Cold & Flu Relief** contient aussi de la **Glycérine** qui offre des propriétés hydratantes supplémentaires sur la muqueuse nasale irritée. Tous les ingrédients sont d'origine 100% naturelle.

Sinomarin® Cold & Flu Relief peut être utilisé seul, comme une alternative naturelle aux décongestionnants médicamenteux (corticostéroïdes locaux, antihistaminiques, vasoconstricteurs), ou en combinaison avec ces derniers pour améliorer leur efficacité.

Propriétés:

- Soulage les symptômes du rhume et de la grippe tels que la congestion nasale, la pression dans les sinus et l'écoulement nasal.
- Fluidifie les sécrétions muqueuses.
- Nettoie les fosses nasales en éliminant les mucosités et les agents infectieux qui y sont présents (par action mécanique).
- Hydrate la muqueuse et soulage de la sécheresse nasale.
- Favorise la récupération naturelle de la muqueuse nasale.

Sinomarin® Cold & Flu Relief est recommandé:

- Pour le soulagement naturel des symptômes nasaux associés au rhume et à la grippe (par. ex. congestion nasale, rhinorrhée) et en cas de rhinosinusite.
- Pour l'élimination des agents infectieux qui peuvent provoquer des infections secondaires, telles que la sinusite et l'otite (par action mécanique).
- Quand les décongestionnants médicamenteux sont contre-indiqués (par ex. l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, le diabète).
- Pour compléter l'efficacité des décongestionnants médicamenteux.

Composition: Eau de mer (équivalent à 2.3% NaCl), Eau purifiée, complexe Algomer™ (extraits d'*Undaria pinnatifida* et *Spirulina platensis*), extrait de *Thymus vulgaris*, huile essentielle d'*Eucalyptus globulus*, huile essentielle de *Mentha spicata*, Glycérine d'origine végétale, Propanediol.

Sinomarin® Cold & Flu Relief ne contient pas de médicaments, d'agents de conservation ou d'additifs chimiques. 100% naturel.

GR To Sinomarin® Plus Algae Cold & Flu Relief με το σύμπλεγμα Algomer™ είναι ένα 100% φυσικό προϊόν το οποίο ανακουφίζει από τα ρινικά συμπτώματα που σχετίζονται με το κοινό κρυολόγημα και τη γρίπη. Η μοναδική του σύνθεση (αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας υπό εξέταση) συνδυάζει τη φυσική αποσυμφορητική δράση (μέσω όσμωσης*) του υπέρτονου διαλύματος θαλασσινού νερού (2.3% NaCl) με τις καλά τεκμηριωμένες –ενεργητικές για το ρινικό βλεννογόνο– ιδιότητες των εκχυλισμάτων φυκών** που περιέχονται στο **σύμπλεγμα Algomer™** και των φυσικών συστατικών του Ευκαλύπτου, του Δυόσμου και του Θυμαριού. Το **Sinomarin® Cold & Flu Relief** καθαρίζει τις ρινικές κοιλότητες και βοηθά στη μηχανική απομάκρυνση παθογόνων παραγόντων.

Το θαλασσινό νερό που περιέχεται στο **Sinomarin® Cold & Flu Relief** συλλέγεται από τον κόλπο Cancale που βρίσκεται στην περιοχή της Βρετανίας, στη Γαλλία. Η περιοχή είναι γνωστή για την εξαιρετική ποιότητα του θαλασσινού νερού, η οποία αποδίδεται στην ανοικτή θάλασσα και τα ισχυρά παλιρροϊκά ρεύματα που καθιστούν το νερό πλούσιο σε μεταλλικά άλατα και ιονοστοιχεία. Η ποιότητα του θαλασσινού νερού ελέγχεται σε συνεχή βάση από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Εκμετάλλευση της Θάλασσας (IFREMER), υπό την αιγίδα της Γαλλικής Κυβέρνησης.

Το **σύμπλεγμα Algomer™** αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό από 100% φυσικά συστατικά, τα οποία έχουν εξαχθεί από τα φύκια *Undaria pinnatifida* και *Spirulina platensis*. Και τα δύο είδη φυκών χρησιμοποιούνται επί μακρόν στην Ανατολίτικη ιατρική για την προαγωγή της υγείας και τη θεραπεία πολλών παθήσεων, ενώ παράλληλα αποτελούν μέρος της διατροφής της Άπω Ανατολής. Το **σύμπλεγμα Algomer™**, ειδικά σχεδιασμένο για ρινική χρήση, αποτελείται από ένα μείγμα φυσικών συστατικών από φύκη όπως η ρηγοκυανίνη και μια πληθώρα από σύμπλοκα πολυσακχαριτών συμπεριλαμβανομένων και των φουκοϊδανών. Τα συστατικά αυτά σχηματίζουν ένα προστατευτικό επίστρωμα που εγκλωβίζει, παγιδεύει και εμποδίζει την επαφή και/ή την εισχώρηση βλαβερών εξωτερικών παραγόντων (π.χ. ιοί, βακτήρια, κ.λπ.) στο ρινικό βλεννογόνο, βοηθώντας στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης και ενισχύοντας τη φυσική του λειτουργία. Τα φύκια *Undaria pinnatifida* και *Spirulina platensis* συλλέγονται, αντίστοιχα, από τα πιο παρθένα νερά της Παταγονίας στην Αργεντινή και της Βρετανίας στη Γαλλία και έχουν πιστοποίηση βιολογικής προέλευσης.

Τα αιθέρια έλαια του **Ευκαλύπτου** (*Eucalyptus globulus*) και του **Δυόσμου** (*Mentha spicata*), καθώς και το εκχύλισμα **Θυμαριού** (*Thymus vulgaris*) είναι πλούσια σε συστατικά (π.χ. 1,4-cineole, menthol, carvacrol, κ.α.) που χρησιμοποιούνται ευρέως καθώς είναι γνωστά για τις ενεργητικές τους ιδιότητες στο ρινικό βλεννογόνο και την αίσθηση αναζωογόνησης που προσδίδουν. Το **Sinomarin® Cold & Flu Relief** περιέχει επίσης **Γλυκερίνη**, η οποία έχει πρόσθετες ενυδατικές ιδιότητες, ιδιαίτερα ενεργητικές για τον ερεθισμένο ρινικό βλεννογόνο. Όλα τα συστατικά είναι 100% φυσικής προέλευσης.

Το **Sinomarin® Cold & Flu Relief** μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα, ως μια εναλλακτική φυσική λύση έναντι των φαρμακευτικών αποσυμφορητικών (τοπικά κορτικοστεροειδή, αντιισταμινικά, αγγειοσυσπαστικά) ή σε συνδυασμό με αυτά, προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους.

Ιδιότητες:

- Ανακουφίζει από τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης, συμπεριλαμβανομένης της ρινικής συμφόρησης, της πίεσης στα ιγμόρεια και της ρινικής καταρροής.
- Ρευστοποιεί τις βλεννώδεις εκκρίσεις.
- Καθαρίζει τις ρινικές κοιλότητες, απομακρύνοντας τη βλέννη και τους παγιδευμένους σε αυτήν παθογόνους παράγοντες (μέσω μηχανικής έκπλυσης).
- Ενυδατώνει τον ρινικό βλεννογόνο και ανακουφίζει από τη ρινική ξηρότητα.
- Βοηθάει στη φυσική αποκατάσταση της λειτουργίας του ρινικού βλεννογόνου.

Το Sinomarin® Cold & Flu Relief συνιστάται:

- Για τη φυσική ανακούφιση από τα ρινικά συμπτώματα που σχετίζονται με το κοινό κρυολόγημα και τη γρίπη (π.χ. ρινική συμφόρηση, ρινική καταρροή), καθώς και σε περιπτώσεις ρινοκολπίτιδας.
- Για την απομάκρυνση, μέσω μηχανικής έκπλυσης, παραγόντων που δύναται να προκαλέσουν δευτερογενείς λοιμώξεις (π.χ. ιγμορίτιδα, ωτίτιδα).
- Για τις περιπτώσεις εκείνες που αντενδείκνυται η χρήση αποσυμφορητικών φαρμάκων (π.χ. σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακά νοσήματα, διαβήτη).
- Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών αποσυμφορητικών.

Σύνθεση: Θαλασσινό νερό (αντιστοιχεί σε 2.3% NaCl), Κεκαθαρμένο ύδωρ, σύμπλεγμα Algomer™ (εκχυλίσματα *Undaria pinnatifida* & *Spirulina platensis*), εκχύλισμα Θυμαριού (*Thymus vulgaris*), αιθέριο έλαιο Ευκαλύπτου (*Eucalyptus globulus*), αιθέριο έλαιο Δυόσμου (*Mentha spicata*), Γλυκερίνη φυτικής προέλευσης, Προπανοδιόλη.

Το **Sinomarin® Cold & Flu Relief** δεν περιέχει φαρμακευτικές ουσίες, συντηρητικά ή χημικά πρόσθετα. 100% φυσικό προϊόν.



Cold & Flu Relief

100% NATURAL RELIEF FROM
NASAL SYMPTOMS OF THE COMMON COLD & FLU

HYPERTONIC SEA WATER SOLUTION

ALGOMER™ + EUCALYPTUS,
COMPLEX SPEARMINT & THYME

Recommended dosage:

For children over 6 years and adults. Use as per below, or as per physician's instructions. May be used without interruption for up to 30 days.

6-12 years: 2 to 3 sprays in each nostril up to 3 times daily.

>12 years: 2 to 4 sprays in each nostril up to 5 times daily.

Precautions: For nasal use only. Do not use on more than one individuals. Do not use past expiry date. Keep out of reach of children. Do not use during pregnancy or breastfeeding. Do not use in cases of sensitivity or if allergic to any of the components.

Advice: A mild and temporary irritation may be experienced at the beginning of use.

Storage conditions:

Store below 25°C. Protect from sunlight.

Other information:

Special valves prevent contamination of the solution once the spray has been opened and thereby the necessity to use preservatives.

Sinomarin® is a complete line of hypertonic sea water solutions covering the needs of all ages from newborns to adults.

Sinomarin® products are CE-marked Medical Devices conforming to the requirements of Directive 93/42 of the European Union.

Dosage recommandé:

Pour enfants de plus de 6 ans et adultes. Utiliser comme indiqué ci-dessous ou selon les instructions du médecin. Peut être utilisé jusqu'à 30 jours maximum sans interruption.

6-12 ans: 2 à 3 pulvérisations dans chaque narine, jusqu'à 3 fois par jour.

>12 ans: 2 à 4 pulvérisations dans chaque narine, jusqu'à 5 fois par jour.

Précautions: Pour usage nasal seulement. Ne pas partager le même flacon avec un autre individu. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Ne pas utiliser en cas de sensibilité ou d'allergie à l'un des composants.

Conseil: Une légère et temporaire sensation d'irritation peut être ressentie au début de l'utilisation.

Conditions de stockage:

Conserver en-dessous de 25 °C. Protéger du soleil.

Autres informations:

Valve spéciale intégrée au récipient protège la solution de contamination externe sans utilisation de conservateur.

Sinomarin® est une gamme complète de solutions d'eau de mer hypertonique, couvrant les besoins de tous âges, des nouveau-nés aux adultes.

Les produits **Sinomarin**® sont des dispositifs médicaux marqués CE en conformité avec les exigences de la directive 93/42 de l'Union Européenne.

Προτεινόμενο δοσολογικό σχήμα:

Για παιδιά άνω των 6 ετών και ενήλικες. Χρησιμοποιήστε σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς διακοπή για έως 30 ημέρες.

6-12 ετών: 2 με 3 ψεκασμοί σε κάθε ρουθούνι έως 3 φορές ημερησίως.

>12 ετών: 2 με 4 ψεκασμοί σε κάθε ρουθούνι έως 5 φορές ημερησίως.

Προειδοποιήσεις: Το προϊόν προορίζεται για ρινική χρήση μόνο. Να μη χρησιμοποιείται από άλλο άτομο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να μη χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη ή το θηλασμό. Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ευαισθησίας ή αλλεργίας σε κάποιο από τα συστατικά.

Κατά τις πρώτες χρήσεις του προϊόντος ενδέχεται να παρατηρηθεί ήπιος, αλλά παροδικός ερεθισμός.

Συνθήκες φύλαξης:

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Προστατεύστε το προϊόν από την ηλιακή ακτινοβολία.

Άλλες πληροφορίες:

Ειδικές βαλβίδες εμποδίζουν την επιμόλυνση του διαλύματος από τη στιγμή που ανοίγεται το προϊόν και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη προσθήκης συντηρητικών.

Το **Sinomarin**® είναι μια πλήρης σειρά προϊόντων υπέρτονου διαλύματος θαλασσινού νερού, σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε ηλικίας, από τα νεογέννητα μέχρι τους ενήλικες.

Τα προϊόντα **Sinomarin**® είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Instructions for use / Instructions d'utilisation / Τρόπος χρήσης

- 1 Blow nose to clear out mucus before using **Sinomarin**® Cold & Flu Relief.
- 2 Remove protective cap.
- 3 Hold the spray bottle upright and spray a couple of times in order to activate the spray pump.
- 4 Bend neck gently forward over a wash basin and tilt head to the right.
- 5 Gently insert applicator into the left nostril, in parallel with the nasal septum, and press firmly.
- 6 Turn head to opposite side and repeat application in other nostril.
- 7 Remove spray from nostril, return to upright position while allowing solution to work for a few seconds and then blow the nose.
- 8 Repeat procedure if necessary.
- 9 Wash applicator well with warm water and wipe dry after each use.



- 1 Mouchez le nez afin d'éliminer les mucosités avant d'utiliser **Sinomarin**® Cold & Flu Relief.
- 2 Retirez le capuchon de protection.
- 3 Maintenez le flacon dans une position verticale et pulvérisez quelques fois afin d'activer la pompe spray.
- 4 Pliez légèrement le cou vers l'avant au-dessus d'un lavabo et penchez la tête à droite.
- 5 Insérez doucement l'embout dans la narine gauche (en parallèle à la cloison nasale) et appuyez fermement.
- 6 Tournez la tête de l'autre côté et répétez l'application dans l'autre narine.
- 7 Enlevez l'embout nasal de la narine. Revenez à la position verticale, permettant ainsi à la solution d'agir pendant quelques seconde, puis mouchez-vous.
- 8 Répétez procédure si nécessaire.
- 9 Lavez l'embout nasal bien à l'eau chaude et essuyez-le après chaque utilisation.



- 1 Προτού χρησιμοποιήσετε το **Sinomarin**® Cold & Flu Relief, φυσήξτε τη μύτη, ώστε να απομακρυνθεί η βλέννη.
- 2 Αφαιρέστε το προστατευτικό κώμα.
- 3 Κρατήστε τη φιάλη σε όρθια θέση και ψεκάστε μερικές φορές για να ενεργοποιήσετε την αντλία ψεκασμού.
- 4 Γείρτε το κεφάλι σας ελαφρά προς τα εμπρός επάνω από το νιπτήρα και εν συνεχεία προς τα δεξιά.
- 5 Εισάγετε προσεκτικά το ρύγχος στο αριστερό ρουθούνι, παράλληλα προς το ρινικό διάφραγμα, και πιέστε σταθερά.
- 6 Στρέψτε το κεφάλι προς την άλλη πλευρά και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το άλλο ρουθούνι.
- 7 Απομακρύνετε το ρύγχος από το ρουθούνι, επανέλθετε σε όρθια θέση και αφήστε το διάλυμα να δράσει για μερικά δευτερόλεπτα. Εν συνεχεία φυσήξτε τη μύτη σας.
- 8 Επαναλάβετε τη διαδικασία, εφόσον χρειάζεται.
- 9 Μετά από κάθε χρήση, φροντίστε να ξεπλύνετε το ρύγχος προσεκτικά με ζεστό νερό και να το στεγνώσετε.



* Natural process characterized by water movement out of the swollen nasal tissues due to the local difference in salt (NaCl) content induced by nasal application of Sinomarin®.

** Brown algae: *Undaria pinnatifida*; blue/green algae: *Spirulina platensis*.

* Processus naturel caractérisé par la sortie de l'eau des tissus nasaux enflammés en raison de la différence locale de concentration de sel (NaCl) induite par l'application nasale de Sinomarin®.

** Algues brunes: *Undaria pinnatifida*; algues bleues/vertes: *Spirulina platensis*.

* Φυσική διεργασία που χαρακτηρίζεται από μετακίνηση νερού εκτός των οιδηματοδών ρινικών ιστών εξαιτίας της διαφοράς συγκέντρωσης άλατος (NaCl) τοπικά, η οποία επάγεται από την εφαρμογή του Sinomarin®.

** Φαιοφύκη: *Undaria pinnatifida*, κυανοφύκη: *Spirulina platensis*.

Sinomarin® Cold & Flu Relief is covered by an international patent application (pending) filed by Gerolymatos International S.A., E.U.


Sinomarin® Cold & Flu Relief est protégé par une demande de brevet international (en instance) soumise par Gerolymatos International S.A., U.E.

Το **Sinomarin**® Cold & Flu Relief καλύπτεται από διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (εκκρεμής αίτησης) με δικαίωμα τη Gerolymatos International A.E.B.E.

Sinomarin® is a registered trademark for Gerolymatos International S.A., E.U.
Sinomarin® est une marque déposée par Gerolymatos International S.A., U.E.
Το Sinomarin® αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα της Gerolymatos International A.E.B.E., E.E.
Το Sinomarin® διανέμεται στην Ελλάδα από τη Gerolymatos International A.E.B.E., 210 3500800.



www.sinomarin.com

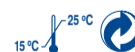

ITEM REFERENCE CODE	213622D
ITEM DESCRIPTION	INSERT SINOMARIN PLUS ALGAE C&F RELIEF 30ML ENG-FR-GR
LATEST UPDATE OF CODE/ DATE	8/7/2020
VERSION DATE & TIME	28/08/2020-13:34
APPROVAL BY GI REGULATORY/ DATE, NAME & SIGNATURE	
APPROVAL BY GI MARKETING/ DATE, NAME & SIGNATURE	
COMMENTS	