



IVD điện cực K⁺ dùng cho xét nghiệm điện giải
Chủng loại: Convergys® ISE K⁺ electrode
Mã hàng : 1100-1004
Đóng gói: 1 cái/ hộp

Convergent
Technologies

1. **Mục đích sử dụng:** Dùng cho máy xét nghiệm điện giải Convergys® ISE.

2. **HSSD:**

1. Đổ dung dịch Convergys ISE Filling Solution bằng 2/3 chiều cao buồng bên trong của điện cực.
2. Sau đó xoay chặt điện cực Ag/AgCl (xem hình dưới), lắc điện cực cho đến khi bọt khí ra ngoài
3. Lắp vào máy đúng vị trí quy định.
4. Sử dụng serum để kích hoạt điện cực. Quá trình phải được thực hiện ở chế độ “cảm biến”

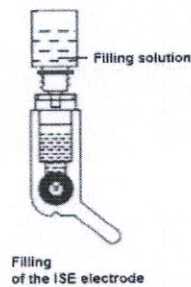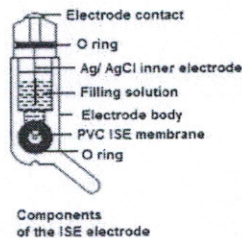

CAUTION:

DO NOT UNSE ANY SHARP TOOLS LIKE NEEDLE FOR FILLING THE ELECTRODE.

IT WILL DAMAGE THE ELECTRODE MEMBRANE!

GIÁM ĐỐC

Cao Xuân Dũng

Chú ý: Để điện cực trở nên ổn định có thể mất 90 phút

3. **Bảo trì:** Điện cực mới có thể dùng được luôn. Nếu kết quả không ổn định, sử dụng huyết tương mới thu thập để kích hoạt điện cực đến khi điện cực hoạt động ổn định (mất khoảng 30-60 phút).

Điện cực bẩn và không đủ dung dịch bên trong có thể dẫn đến kết quả sai lệch hoặc lỗi (bao gồm giá trị mV bất thường hoặc giá trị mV vượt dài). Nếu điện cực bẩn, lau sạch bằng dung dịch chuyên dụng, hoặc sử dụng tăm bông lau điện cực theo đường dọc thân điện cực. Nếu dung dịch làm đầy điện cực ít, hãy bỏ dung dịch cũ và thay bằng dung dịch mới.

4. **Hạn sử dụng và bảo quản:** Có thể bảo quản nhiều năm với điều kiện bảo quản ở nhiệt độ phòng và tránh ánh nắng mặt trời. Tuyệt đối không được bảo quản trong tủ lạnh hay đông đá. Nếu không sử dụng một thời gian dài, hãy rửa bằng nước và lau khô hoàn toàn, sau đó cất vào hộp.

Convergent Technologies GmbH & Co. KG
Registered Office Ringstrasse 14, 35091 Cölbe, Germany
Tel: +49 6421 8869948 Fax: +49 6421 8869958
Homepage: www.convergent-technologies.de
e-mail: info@convergent-technologies.de