



Evalyn®Brush trông như thế nào?

Bàn chải trắng:

Evalyn®Brush có một bàn chải màu trắng với lông mịn, để đảm bảo rằng sẽ lấy đủ vật liệu tế bào. Lông bàn chải không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào vì chúng rất linh hoạt.



Cánh + phần chèn:

Các cánh cho biết khoảng cách để chèn vào trong suốt. Vỏ trong suốt có bề mặt nhẵn và tròn để tránh gây thương tích và khó chịu.



Pít tông màu hồng:

Pít tông được đẩy vào mặt sau của vỏ trong suốt để đảm bảo rằng chốt trắng ở đúng vị trí để lấy mẫu.

Điều này được xác nhận bằng một cú nhấp chuột. Ở vị trí này, pít tông màu hồng tạo ra tiếng tách mỗi khi nó được xoay 360 độ. Điều này giúp bạn dễ dàng đếm số lần Evalyn®Brush đã được xoay.



Vỏ trong suốt:

Sau khi lấy mẫu, bàn chải màu trắng được rút vào vỏ trong suốt bằng cách kéo pít tông màu hồng trở lại. Vỏ trong suốt đảm bảo rằng vật liệu tế bào được bảo vệ trong khi vận chuyển đến phòng thí nghiệm.



Nắp màu hồng:

Nắp màu hồng giúp bảo vệ và vệ sinh. Sau khi rút chốt trắng vào vỏ trong suốt, chỉ cần nhấp lại vào nắp trên thiết bị Evalyn®, do đó bạn không chạm vào chất lỏng cơ thể và vật liệu tế bào được bảo vệ khi vận chuyển đến phòng thí nghiệm.

Sản xuất tại Hà Lan, phiên bản 2018-11



Rovers Medical Devices BV
Lekstraat 10, 5347 KV Oss
Hà lan
T +31 (0) 412 648
870 F +31 (0) 412
623 835
info@roversmedicaldevices.com www.roversmedicaldevices.com Hà Lan.

Rovers® Evalyn®Brush là sản phẩm được cấp bằng sáng chế và thiết kế đã đăng ký.

Rovers® và Evalyn®Brush là các nhãn hiệu đã đăng ký của Rovers Medical Devices BV có trụ sở tại Hà Lan.

evalyn®brush

Sự lựa chọn tốt nhất của bạn để tự lấy mẫu HPV



Được chọn
là tốt nhất
thiết bị tự lấy mẫu
bởi chính Hà Lan và người Đan Mạch
trình kiểm
tra cổ tử cung



Rovers® Medical Devices

evalyn®brush

Thoải mái, an toàn và đáng tin cậy

HPV

HPV là viết tắt của Human Papilloma Virus. Virus này tồn tại ở nhiều giống, có thể được phân loại là các giống có nguy cơ cao và nguy cơ thấp.

Nhiễm HPV nguy cơ cao trong thời gian dài có thể gây ra các bất thường tế bào và cuối cùng có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung.

Do đó, xét nghiệm sự hiện diện của HPV là một cách quan trọng để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung.

Các xét nghiệm tìm HPV có thể được thực hiện trên vật liệu tế bào được lấy từ cổ tử cung hoặc âm đạo. Phụ nữ có thể dễ dàng tự lấy mẫu âm đạo tại nhà. Việc kiểm tra thực tế sự hiện diện của HPV được thực hiện bởi các chuyên gia trong phòng thí nghiệm.

The Evalyn®Brush

Evalyn®Brush được phát triển đặc biệt cho mục đích tự lấy mẫu tại nhà.

Sản phẩm mới này được tạo ra bởi Rovers Medical Devices bao gồm một bàn chải với linh hoạt tinh tế sợi để đảm bảo đủ mẫu.

Trong quá trình phát triển Evalyn®Brush, sự thoải mái và bảo mật tối ưu cho người dùng là chìa khóa

ưu tiên, và thiết kế đã được thử nghiệm và đánh giá rộng rãi bởi phụ nữ.

Kết quả của các nghiên cứu mở rộng với Evalyn®Brush, đã chỉ ra rằng nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp cận những phụ nữ hiện không phản hồi lời mời làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung.

Bằng cách cung cấp cho phụ nữ một cách đơn giản và dễ dàng để tự thu thập mẫu, các giai đoạn sơ bộ và tiến triển hơn của ung thư cổ tử cung có thể được phát hiện và điều trị sớm hơn.

Thiết bị y tế Rovers

Rovers Medical Devices BV thiết kế, phát triển, sản xuất và tiếp thị các thiết bị y tế (thiết bị tầm soát ung thư) để xét nghiệm tế bào học, vi khuẩn, virus (HPV) - và DNA. Các sản phẩm của Rovers® đang được sử dụng tại hơn 53 quốc gia trên thế giới.

Để phát triển các sản phẩm mới, chúng tôi làm việc cùng với những người dùng có mục đích và các chuyên gia y tế về phụ khoa, tế bào học, bệnh lý

vấn vân.


"Với Evalyn®Brush, tôi có thể lấy mẫu tại nhà. Điều đó rất dễ thực hiện và tôi có nhiều quyền riêng tư hơn".

Lợi ích của Evalyn®Brush:

- Mức độ chấp nhận của phụ nữ cao dẫn đến tỷ lệ tham gia sàng lọc tăng đáng kể.
- Được hơn 95% phụ nữ ở học.
- Số lượng mẫu hợp lệ cao. • Được kiểm chứng trong các nghiên cứu nhằm mục tiêu đến các nhóm dân số khác nhau các nhóm: rúi ro cao, những người phản hồi và những người không phản hồi của một chương trình sàng lọc.
- Tổng cộng hơn 50000 phụ nữ đã tham gia vào các nghiên cứu đã được công bố trong đó Evalyn®Brush được sử dụng.

Tính năng sản phẩm:

- Dụng cụ tự lấy mẫu vô trùng thoải mái và dễ sử dụng.
- Các tính năng tích hợp để đảm bảo mẫu chính xác đang lấy:
 - độ dài chèn xác định
 - vị trí lấy mẫu xác định
 - bộ sưu tập xác định của vật liệu tế bào.
- Thiết bị lấy mẫu = thùng lấy mẫu = không xử lý thêm tại nhà.
- Nắp màu hồng cho phép xử lý vệ sinh trước và sau khi sử dụng.
- Mẫu có thể được vận chuyển khô (Không có rúi ro liên kết với chất lỏng bảo quản tại nhà).

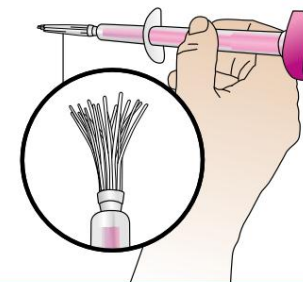

Evalyn®Brush bao gồm một bàn chải với các sợi mảnh để đảm bảo lấy mẫu đủ và an toàn.

