


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU UV KN-4005AB

Bảng điều khiển:

KERNEL  
KH

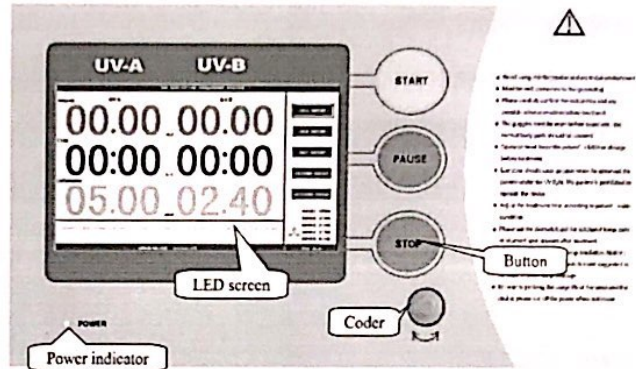

□ Đèn báo nguồn Trạng thái bật / tắt nguồn thiết bị trực tiếp. Bật nguồn điện lên công tắc, đèn báo bật sáng; tắt công tắc nguồn, đèn tắt. Coder trái và phải: rẽ trái hoặc phải để thay đổi cột đã chọn. Nhấn: cột đã chọn được chọn.

Nút Bắt đầu Nhấn nút này sau khi cài đặt chế độ, bật tắt, trạng thái xoay vòng. Nút tạm dừng Sử dụng để tạm dừng công việc đối với bức xạ, tắt đèn UV, máy định lượng

Chỉ số sức mạnh

Mã hóa

Cái nút

Màn hình LED

Hệ thống xử lý bức xạ UV19

giá trị thời gian sẽ bị đóng băng

Nút dừng Sử dụng để dừng công việc. Làm cho liều lượng và thời gian bằng không

Phím chức năng : Để thiết lập các thông số UVA / UVB, cài đặt hệ thống và bảo trì tại nhà máy.

(Xem 4.3.1, 4.3.3.4.3.4)

Khu vực trạng thái Để hiển thị trạng thái của quạt và công tắc bàn đạp. Trạng thái của công tắc bàn đạp. Màu đỏ tắt, Màu xanh lá cây đang bật. Lưu ý: Bước bất kỳ của công tắc sẽ có màu xanh lục. Khi hai công tắc bàn đạp bật sáng, đèn báo sẽ có màu đỏ và quá trình điều trị được tạm dừng. Hiển thị trạng thái của quạt, nếu di chuyển, nó đang bật, nếu không, nó đang tắt. Lờn nhắc tin nhắn Hiển thị thông tin về thiết lập và điều trị. 4.3.1 Cài đặt tham số

Chọn cài đặt "UVA SETUP", menu "UVA" sẽ xuất hiện trên giao diện nhupic4-3. Sau đó, thiết lập thông số (liều lượng / thời gian / cường độ), nhấn mã hóa để nhập trạng thái sửa đổi (giá trị chuyển sang màu xanh lam) như pic4-4. Sau khi hoàn tất cài đặt, chọn "OK" để lưu Trạng thái lờn nhắc củaFunctionMessages

Hệ thống xử lý bức xạ UV20

đã sửa đổi cài đặt, đã chọn "HỦY" để hủy cài đặt. Cài đặt UVB giống như cài đặt UVA.



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Phương Thanh