

**Bộ định vị cổ định đầu gối và chân Klarity®
R634-LCF: R634-LGF
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

THÔNG TIN CHUNG
Bộ định vị cổ định đầu gối và chân Klarity được sử dụng để định vị bệnh nhân trong quá trình điều trị xạ trị.

MÔ TẢ SẢN PHẨM


Bộ định vị cổ định đầu gối và chân Klarity được sử dụng để cố định và hỗ trợ phần thân dưới trong quá trình điều trị xạ trị. Tấm đế cố định vào ghế điều trị bằng hai thanh chì mục (trên và dưới). Đệm chân dán vào tấm đế bằng cách sử dụng một thanh chì mục nhỏ. Có thể sử dụng thêm các khối nâng cao để nâng đệm chân. Bàn chân được đặt trong đệm chân và dây đai tay tùy chọn có thể được sử dụng để chống vai.

BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH

Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp. Lau kỹ bằng chất tẩy rửa sát trùng trung tính. Để khô hoàn toàn trước khi sử dụng tiếp theo.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Gắn Bộ định vị cổ định chân vào bàn điều trị hoặc ghế CT bằng thanh chì mục.
 2. Đặt đệm chân trên tấm đế.
 3. Đặt bệnh nhân trên Bộ định vị cổ định Chân.
 4. Sử dụng các khối nâng cao để nâng cao chân khi cần thiết.
 5. Điều chỉnh độ nghiêng của đệm chân nếu cần.
 6. Nếu sử dụng tay nắm, hãy xác định chiều dài tối ưu và đặt qua bóng chì mục vào rãnh trên phần nghiêng của đệm chân.
- * Tất cả các đệm cứng có thể được đặt trực tiếp trên bàn điều trị, sử dụng các thanh chì mục tiêu chuẩn.

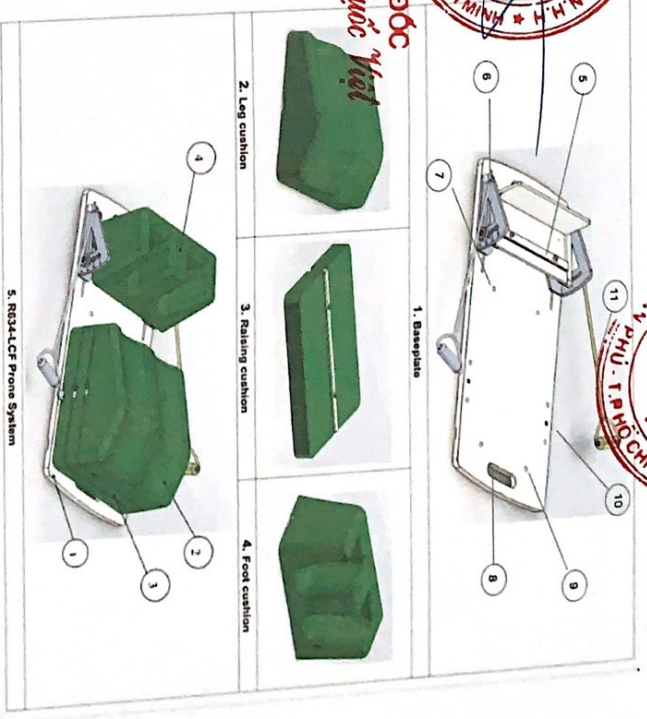

Number	Item Name
1	Tấm Đế
2	Đệm kê chân
3	Khởi chỉnh độ cao
4	Đệm kê bàn chân
5	Thanh chì mục cho đệm kê bàn chân
6	Thanh chì mục cho Bộ tay nắm
7	Lỗ dưới cho thanh chì mục
8	Lỗ mang
9	Lỗ trên cho thanh chì mục
10	Lỗ cho thanh chì mục đệm chân
11	Bộ tay nắm

To be used by a qualified medical professional
IFUB-005

Keep in a cool and dry environment
33°C Store below 35°C (95°F)



EClREP
Lotus NL B.V.
Koninngin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands
T: +31645171879 (English)
T: +31626669008 (Dutch)

Klarity Medical Products, L
600 Industrial Parkw
Heath, OH 430
T: 740.788.8107 F: 740-788-81
info@klaritymedical.c
www.klaritymedical.c

Klarity Leg Positioner INSTRUCTIONS FOR USE

GENERAL INFORMATION

The Klarity Leg Positioner is used for positioning and re-positioning patients during radiation therapy treatment.

PRODUCT DESCRIPTION

The Klarity Leg Positioner is used for immobilizing and supporting the lower torso during radiation therapy treatments. The baseplate fixes to the treatment couch with two indexing bars (upper and lower). The Leg cushion affixes to the baseplate using a small indexing bar. Additional elevation blocks can be used to elevate the leg cushion. The feet are placed in the foot cushion and optional arm straps can be used for shoulder suppression.


STORAGE AND CLEANING

Store in a clean, dry place away from direct sunlight. Wipe thoroughly with a neutral antiseptic cleaner. Allow to dry thoroughly before next use.

INSTRUCTIONS FOR USE


1. Attach the Leg Positioner to the treatment table or CT Couch with an indexing bar.
2. Place the leg cushion on the baseplate.
3. Position the patient on the Leg Positioner.
4. Use the elevation blocks to raise the legs as needed.
5. Adjust the tilt of the foot cushions if needed.
6. If using hand grips, determine optimal length and place the indexing ball in the slot on the tilting portion of the foot cushion.

*The cushions can all be placed directly on the couch table as well, using standard indexing bars.

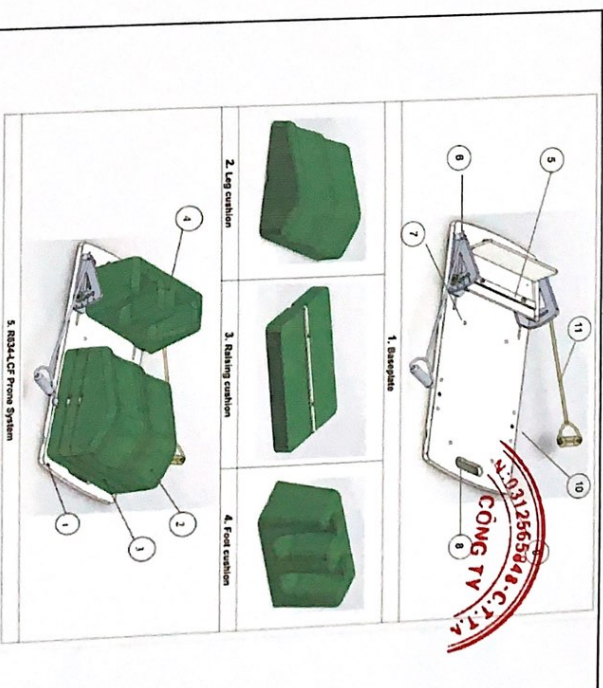

Number	Item Name
1	Baseplate
2	Leg Cushion
3	Elevation Blocks
4	Foot Cushion
5	Indexing bar for Foot Cushion
6	Indexing Ball for hand grip
7	Lower Holes for Indexing Bar
8	Carrying Hole
9	Upper Holes for Indexing Bar
10	Indexing Bar Holes for Leg Cushion
11	Hand Grips

To be used by a qualified medical professional
FU8-005

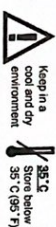

Keep in a
clean, dry
environment

35°C (95°F)
35°C (95°F)

EC REP
Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands
T: +31645171879 (English)
T: +31626669008 (Dutch)

Klarity Medical Products, LLC
600 Industrial Parkway
Heath, OH 43056
T: 740.788.8107 F: 740-788-8109
Info@klaritymedical.com
www.klaritymedical.com