



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số/No: 602/20 / QC-PTN -V/f

- Tên mẫu thử/ *Name of sample* : Khẩu trang y tế 4 lớp
- Ký hiệu mẫu/ *Sample No* : VH/2005/H0253
- Tình trạng mẫu/ *Status of sample* : Mẫu nguyên trong bao gói
- Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : 12/05/2020
- Khách hàng/ *Customer* : Công ty TNHH Dược phẩm DATC Việt Nam
- Thời gian thử nghiệm/ *Test duration* : 12/05/2020-19/05/2020
- Nơi thử nghiệm/ *Place of testing* : Phòng Thử nghiệm Điện-Hóa-Lý
Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT	Tên chỉ tiêu thử <i>Specifications</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>	Giới hạn cho phép (theo TCVN 8389-1:2010)	Giới hạn phát hiện (LOD)	Kết quả <i>Results</i>
1.	Asen (As)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	0.17	0.0075	KPH
2.	Chì (Pb)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	1.00	0.0075	KPH
3.	Thủy ngân (Hg)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	0.12	0.0030	KPH
4.	Antimon (Sb)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	0.10	0.0075	0.4509
5.	Cadimi (Cd)	mg/kg	TK TCVN 8389-1:2010	0.10	0.0075	KPH

Ghi chú:- KPH: Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử- LOD)

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020


Thử nghiệm viên
Analyst

Phòng thử nghiệm Điện-Hóa-Lý
Electrical-Chemical-Physical Testing Lab

Giám đốc
Director

Đặng Minh Dược

Lê Ngọc Thúc

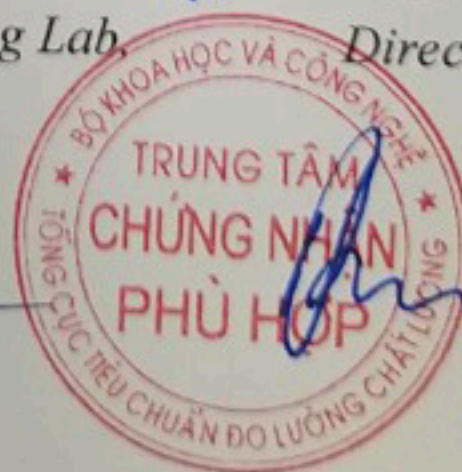

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Dũng