

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH LÂM MINH MÃN

Địa chỉ: 34 Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam


Ngày 18 tháng 6 năm 2020

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật: Thành phần cấu tạo bao gồm 3 lớp: <ul style="list-style-type: none">- Lớp ngoài: là lớp Vải không dệt định lượng vải từ 20-40 g/m², có các màu trắng, xanh, hồng, đen- Lớp lọc: Bằng lớp vi lọc định lượng- Màng lọc: màng lọc vi thấu định lượng 20-30 ± 2 g/m², màu trắng- Lớp trong: là lớp Vải không dệt định lượng vải từ 20-40 g/m², màu trắng- Thanh nẹp mũi: Được làm bằng PE mềm, chiều dài 110 mm ± 5 mmm- Dây thun đeo tai : Được làm bằng sợi Polyeste và Spandex, không latex. Mềm mại, độ co giãn tốt.
1.2	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Giúp che nắng, ngăn ngừa khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp.
1.3	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Bước 1: Hai tay cầm 2 sợi thun của khẩu trang áp sát khẩu trang vào mặt- Bước 2: Đeo dây vào tai, ấn chặt nẹp mũi- Bước 3: Một tay kéo phần trên khẩu trang có thanh nẹp mũi lên sát góc mũi và trán, sau đó bóp thanh nẹp mũi để cho ôm sát đồng thời tay còn lại kẹp phủ phần dưới khẩu trang cho bảo phủ xuống cằm.

1.4	Ứng dụng sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">- Bệnh viện, phòng khám, nha khoa- Trung tâm thẩm mỹ- Môi trường công nghiệp- Phòng dịch bệnh- Sử dụng chống khói bụi hàng ngày
-----	-------------------	---

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

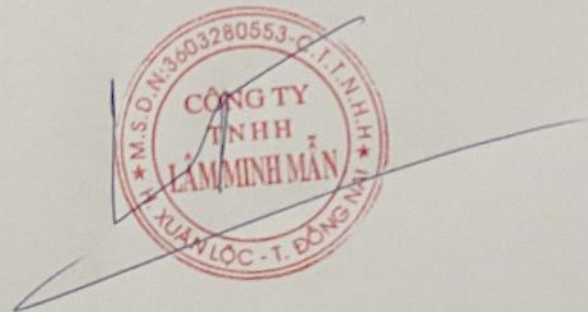

Bùi Hải Lâm