


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI ANTANA	QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ
---	---

Lưu đồ sản xuất như sau:

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ

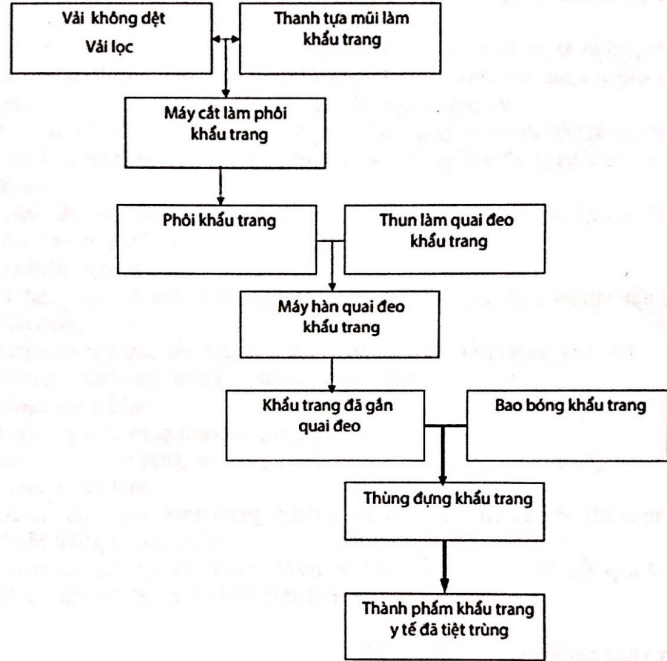

Ghi chú:

- ← Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra

THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1. Kiểm tra nguyên liệu đầu vào

- Tất cả các nguyên liệu, bao bì nhập về kho đều được phòng kiểm tra chất lượng lấy mẫu về kiểm tra. Chỉ những nguyên liệu, bao bì đạt tiêu chuẩn chất lượng và đạt yêu cầu theo quy định mới được nhập kho.
- Các chỉ tiêu kiểm tra: kiểm tra số lượng, chất lượng, xuất xứ, số lô hàng hóa, các chứng nhận (COA) của nguyên liệu. lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan mùi, vị, màu sắc, độ tan, tạp chất, giới hạn vi sinh vật,...
- Dựa theo kế hoạch sản xuất, thủ kho xuất đúng nguyên liệu theo lệnh sản xuất.
- Kiểm tra cảm quan khi xuất: đảm bảo màu sắc, trạng thái theo yêu cầu.

2. Tiến hành

- Phòng sản xuất các thiết bị phải được vệ sinh trước khi sản xuất, lau cồn 70 độ trước ca sản xuất 30 phút.
- Chuẩn bị nguyên liệu.
- Sử dụng máy cắt làm phôi khẩu trang từ vải không dệt và thanh tựa mũi làm khẩu trang.
- Dùng máy hàn quai đeo khẩu trang để ghép thun đeo khẩu trang vào phôi.
- Kiểm tra khẩu trang đủ quai, phôi và hoàn chỉnh.

3. Dán nhãn, đóng hộp

- Bao bóng khẩu trang theo tùy quy cách
- Kiểm tra vỏ hộp đúng, đủ thông tin. Đóng gói theo quy cách ở vỏ hộp.

4. Đóng thùng, lưu kho

- Sau khi đóng gói, đóng thùng thành phẩm được biệt trữ tại kho thành phẩm trên hệ thống giá kệ, pallet.
- Gửi mẫu kiểm nghiệm thành phẩm và lưu mẫu, sau khi có kết quả kiểm nghiệm đạt TCCS thành phẩm mới được xuất bán ra thị trường.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



Nguyễn Thị Thu Huyền