



Vinacontrol
SINCE 1957

Head office

54 Tran Nhan Tong, Hanoi.
Tel : (84.24) 39435640 - (84.24) 39433840
Fax : (84.24) 39433844
vinacontrol@vinacontrol.com.vn
www.vinacontrol.com.vn
Branches in all main ports of Vietnam

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 20V02TND05815-2
Ngày: 20/11/2020

Đơn vị yêu cầu và gửi mẫu	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HABIMEC
Tên hàng	Găng tay khám bệnh không bột HBM
Ký hiệu mẫu	Latex gloves/ size S,M,L,XL
Ngày nhận mẫu	04/11/2020
Ngày trả kết quả	20/11/2020

I. Tình trạng mẫu

- Khoảng 40 chiếc trong túi kín, do khách hàng gửi đến.

II. Kết quả thử nghiệm

STT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	Phương pháp thử
1	Kích thước vật lý:			
1.1	Chiều dài trung bình	mm	242	TCVN 6344 : 2007
1.2	Chiều rộng trung bình	mm	94	
1.3	Độ dày trung bình - Đầu ngón tay - Lòng bàn tay	mm	0.133 0.109	TCVN 1592:2013
2	Độ kín nước	-	Không có hiện tượng rò rỉ nước	TCVN 6344:2007
3	Lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt (trước và sau khi già hóa nhanh)			
3.1	Lực kéo đứt trước già hóa nhanh	N	6.3	TCVN 4509:2013
3.2	Độ giãn dài khi đứt trước già hóa nhanh	%	941	
3.3	Lực kéo đứt sau già hóa nhanh	N	5.9	
3.4	Độ giãn dài khi đứt sau già hóa nhanh	%	865	
4	Cảm quan	-	Bề mặt ngoài của găng tay nhám, cổ tay nhẵn	-
5	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/g	2.2×10^2	TCVN 4884-1:2015


Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận phân tích và chỉ tiêu phân tích không đại diện cho dòng sản phẩm;
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) đã được công nhận VILAS; KPH: không phát hiện; Lod: giới hạn phát hiện
- Tên hàng, ký hiệu mẫu, mã yêu cầu, tên đơn vị yêu cầu và gửi mẫu là do đơn vị yêu cầu cung cấp;
- Khi sao chép phải đảm bảo toàn vẹn nội dung phiếu kết quả này trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm.

PHÂN TÍCH VIÊN

Nguyễn Thúy Quỳnh

**TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 1 - VINACONTROL
GIÁM ĐỐC**

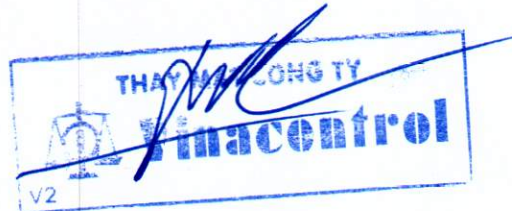

Đỗ Phúc Tuyền



20V02TND05815-01

QLF-13.01/VNC (VN)

IMPROVE QUALITY, TOWARD SUCCESS