



**Vinacontrol**  
SINCE 1957

**Head office**

54 Tran Nhan Tong, Hanoi.

Tel : (84.24) 39435640 - (84.24) 39433840

Fax : (84.24) 39433844

vinacontrol@vinacontrol.com.vn

www.vinacontrol.com.vn

Branches in all main ports of Vietnam

# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 20V02TND05815-1

Ngày: 20/11/2020

Đơn vị yêu cầu và gửi mẫu	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HABIMEC</b>
Tên hàng	Găng tay khám bệnh không bột HBM
Ký hiệu mẫu	Nitrile gloves/ size S,M,L,XL
Ngày nhận mẫu	04/11/2020
Ngày trả kết quả	20/11/2020

## I. Tình trạng mẫu

- Khoảng 40 chiếc trong túi kín, do khách hàng gửi đến.

## II. Kết quả thử nghiệm

STT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	Phương pháp thử
1	Kích thước vật lý:			
1.1	Chiều dài trung bình	mm	257	TCVN 6344 : 2007
1.2	Chiều rộng trung bình	mm	86	
1.3	Độ dày trung bình	mm	0.088	TCVN 1592:2013
	- Đầu ngón tay - Lòng bàn tay		0.060	
2	Độ kín nước	-	Không có hiện tượng rò rỉ nước	TCVN 6344:2007
3	Lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt (trước và sau khi già hóa nhanh)			
3.1	Lực kéo đứt trước già hóa nhanh	N	5.4	TCVN 4509:2013
3.2	Độ giãn dài khi đứt trước già hóa nhanh	%	642	
3.3	Lực kéo đứt sau già hóa nhanh	N	4.3	
3.4	Độ giãn dài khi đứt sau già hóa nhanh	%	604	
4	Cảm quan	-	Bề mặt ngoài của găng tay nhăn, các đầu ngón tay nhám	-
5	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/g	$2.0 \times 10^2$	TCVN 4884-1:2015


**Ghi chú:**

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận phân tích và chỉ tiêu phân tích không đại diện cho dòng sản phẩm;
- Các chỉ tiêu đánh dấu (\*) đã được công nhận VILAS; KPH: không phát hiện; Lod: giới hạn phát hiện
- Tên hàng, ký hiệu mẫu, mã yêu cầu, tên đơn vị yêu cầu và gửi mẫu là do đơn vị yêu cầu cung cấp;
- Khi sao chép phải đảm bảo toàn vẹn nội dung phiếu kết quả này trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm.

PHÂN TÍCH VIÊN

Nguyễn Thúy Quỳnh

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 1 - VINACONTROL  
GIÁM ĐỐC

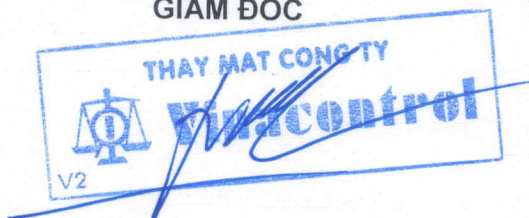

Đỗ Phúc Tuyền



20V02TND05815-01  
QLF-13.01/VNC (VN)

IMPROVE QUALITY, TOWARD SUCCESS