

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM

Địa chỉ : 3A, ngách 91, ngõ Linh Quang, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

VPGD : B24 Lô 20 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel : (84) 24 3553 5450

Fax: (84) 24 3553 5450

Mail : info@hnvietnam.com.vn

Web: <http://hnvietnam.com.vn>


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Sản Phẩm: Kim sinh thiết da

Model/ Mã Sản Phẩm: Epitheasy/EPTxxyy-zz

Nhà Sản Xuất: Medax Srl Unipersonale/Ý

Xuất Xứ: Ý

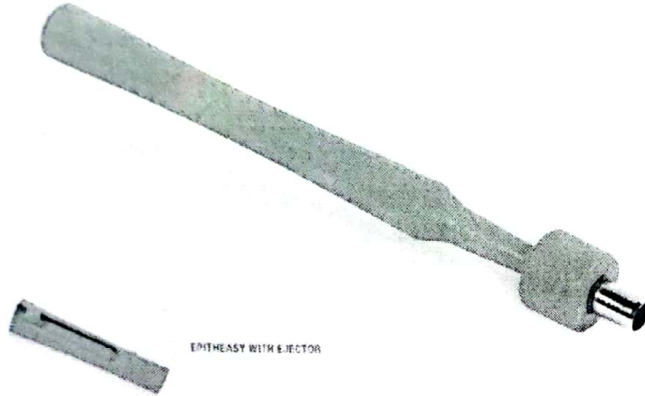

Căng phần da trước khi lấy mẫu , giữ thiết bị bằng ngón cái và ngón trỏ sau đó đặt lên bề mặt da . Nhấn và xoay theo chiều kim đồng hồ , sử dụng áp xuất vừa phải độ sâu vào phần mô thu một lượng mẫu vừa đủ rồi nhẹ nhàng rút ra để tránh không làm rách mô .

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Trần Nhật Quân