



# Dụng cụ chặn mũi khoan

Để bảo mật và đơn giản  
hóa quá trình khoan của  
bạn!

- Bộ dụng cụ đa năng: có thể được sử dụng với tất cả các phạm vi cấy ghép với trình điều khiển trực tiếp.
- 28 điểm dừng cho các mũi khoan ngắn và dài (khoan từ Ø 2,2 đến Ø 5,7 mm).
- Nắm bắt các điểm dừng trực tiếp với góc tương phản.
- Mã hóa màu sắc để dễ dàng xác định các điểm dừng theo que cấy được lắp.
- Kích thước nhỏ.
- Có thể tiết trùng trong nồi hấp.

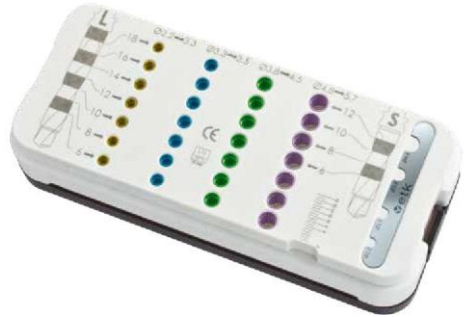

Ref.  
KBU\_00

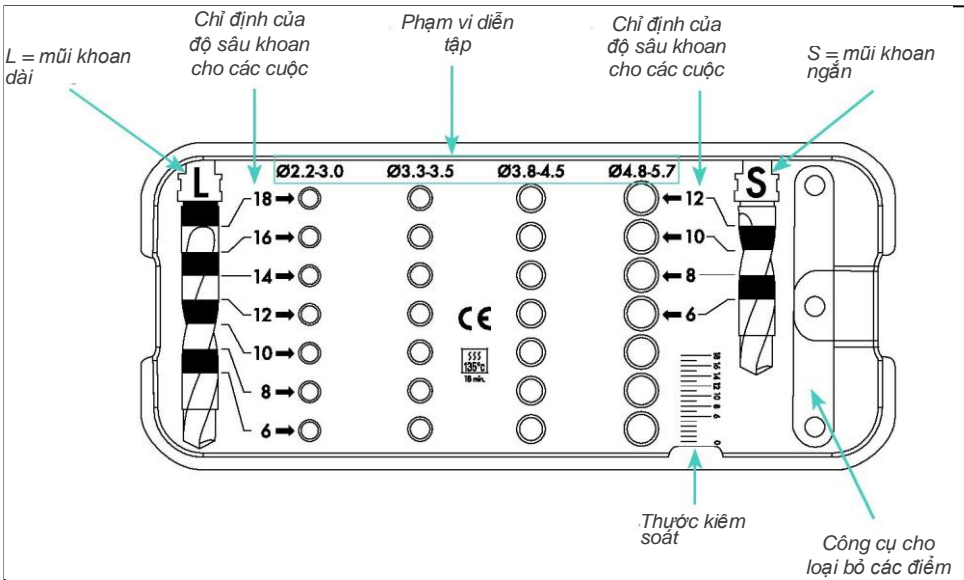


# Hướng dẫn

## Ví dụ sử dụng cho mũi khoan dài

**Scenario 1** sử dụng mũi khoan dài 2,8 / 3,3 và đặt que cấy dài 10 mm

**Scenario 2** sử dụng mũi khoan dài 4,3 / 4,8 và đặt que cấy dài 6 mm

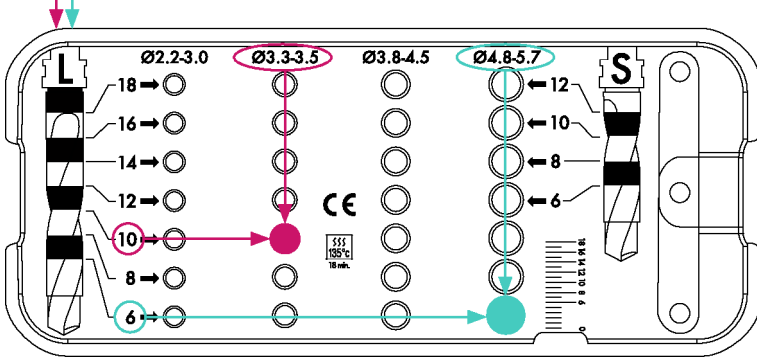

## Ví dụ sử dụng cho mũi khoan ngắn

**Scenario 3** sử dụng mũi khoan ngắn 2.2 / 2.8 và đặt que cấy dài 10 mm

**Scenario 4** sử dụng mũi khoan ngắn 3,8 / 4,3 và đặt que cấy dài 6 mm

