

# MÁY NÉN KHÍ TRỤC XOẮN KHÔNG DẦU

MODEL SLP




*Loại trục xoắn*

## ■ CÁC TÍNH NĂNG

- Thiết kế riêng cho mục đích y tế
- Thiết kế đơn giản
- Ít tiếng ồn, ít rung
- 100% Không dầu
- Diện tích lắp đặt nhỏ
- Bảo trì dễ dàng


## ■ NGUYÊN LÝ TRỤC XOẮN KHÔNG DẦU

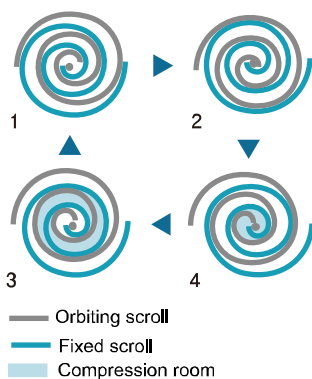

Khí được nén theo các chu trình từ 1 đến 4, khí nén được thoát qua đầu ra ở trung tâm.

## ■ BỘ LỌC BỤI (TÍCH HỢP QUẠT LÀM MÁT)

Ngăn chặn các sự cố động cơ do bụi và hơi ẩm gây ra.

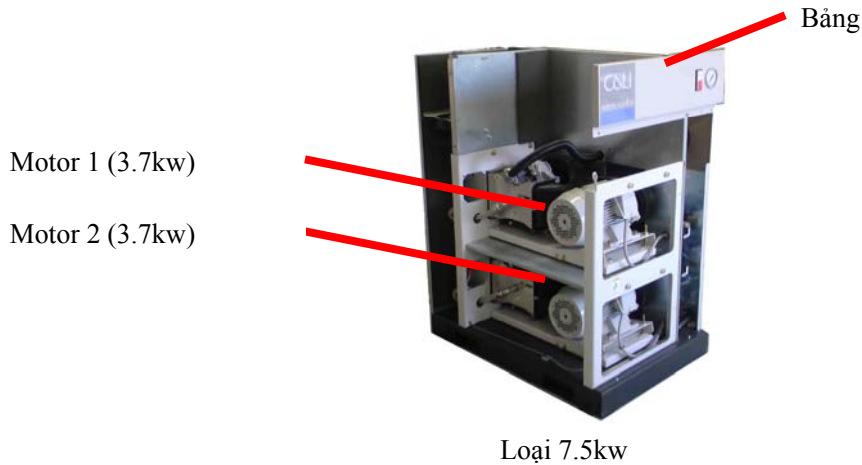

## ■ CÁC CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN

Động cơ kW	Model	Áp lực tối đa MPa	Lưu lượng ra L/min	Vòng/ phút rpm	Bình chứa L	Khối lượng kg	Độ ồn cách 1.5m dB	Độ rung dB	Công suất kcal/h
1.5	SLP-15EF-S85	0.8	168	2260	20 (210)	84	45	45	1291
2.2	SLP-22EF-S85	0.8	255	3200	20 (400)	92	49	45	1893
3.7	SLP-37EF-S85	0.8	420	3150	35 (600)	134	49	45	3184
5.9 (2.2+3.7) (5.5kW type)	SLP-55EF-S85	0.8	675	3200/3150	None (1070)	245	52	45	5076
7.4 (3.7×2) (7.5kW type)	SLP-75EF-S85	0.8	840	3150	None (1070)	260	53	45	6367
11.1 (3.7×3) (11kW type)	SLP-110EF-S85	0.8	1260	3150	None (1530)	330	56	45	9550
14.8 (3.7×4) (15kW type)	SLP-150EF-S85	0.8	1680	3150	None (1070×2)	425	58	45	12734
22.2 (3.7×6) (22kW type)	SLP-220EF-S85	0.8	2520	3150	None (1530×2)	750	58	45	19100

## ■ HỖ TRỢ TỐT NHẤT

CENTRAL UNI là Nhà cung cấp Hệ thống thiết bị chăm sóc sức khỏe giàu kinh nghiệm nhất ở Nhật Bản với sự am hiểu sâu rộng và hợp tác chặt chẽ với nhiều bệnh viện. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ của mình trên toàn thế giới nhằm nâng cao hiệu quả công việc của các nhân viên y tế cũng như năng lực quản lý của các bệnh viện.

## CENTRAL UNI CO.,LTD.

Head office : 2-3-16 Nishikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0065 /TEL : +81-3-3556-8122 /FAX : +81-3-3556-1572

International department : 5-1-1Maigaoka, Kokuraminami-ku, Kitakyushu, Fukuoka, Japan 802-0823 /TEL+81-93-963-8331/FAX : +81-93-963-8291

Branches : Hokkaido/Tohoku/Tokyo/Nagoya/Osaka/Hiroshima/Kyushu

Factory : Kokura(Fukuoka)

URL : <http://www.central-uni.co.jp>

