

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG KHÍ Y TẾ BÁO ĐỘNG KHU VỰC APJ



■ TỔNG QUAN


Báo động khu vực khí y tế là một hệ thống đa tích hợp đầy đủ có khả năng theo dõi việc cung cấp khí y tế 24/24 giờ. Trong trường hợp có những điều kiện cung cấp hoặc áp suất đường ống bất thường, đèn báo động loại khí tương ứng sẽ được bật và khởi động cảnh báo còi.

TÍNH NĂNG


- Bảng theo dõi có thể giám sát được từ 1~8 loại khí như hình minh họa, loại S: 1~4 loại khí; loại L: 5~8 loại khí
- Hiện thị trạng thái áp suất trong đường ống dẫn khí CAO hoặc THẤP
- Mỗi loại khí được phân biệt bởi 1 màu khác nhau trên bảng theo dõi. Màu xanh lá cây là khí oxy, xanh da trời là khí N_2O , màu vàng là khí nén, màu đen là khí hút, màu xám là khí N_2 , màu nâu là khí nén phẫu thuật v.v... Các mã màu khác cho các mục đích cụ thể cũng có thể sản xuất được.

TÊN GỌI VÀ CHỨC NĂNG

Loại S (1~4 khí)

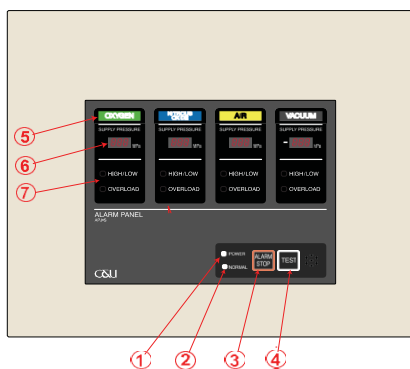


Loại L (5~8 khí)

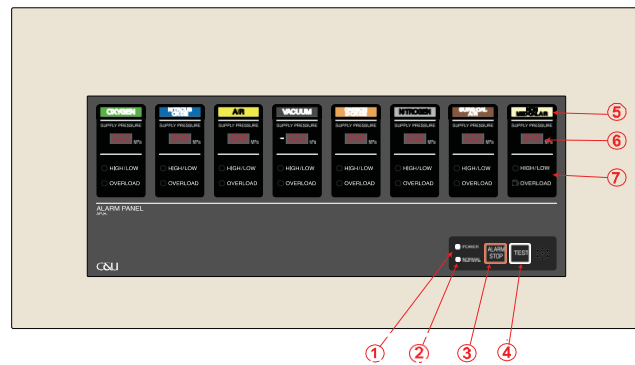


No.	Tên	No.	Tên
1	Đèn báo nguồn	5	Tên loại khí
2	Đèn báo bình thường	6	Cửa sổ hiển thị áp lực
3	Nút tắt báo động	7	Đèn báo bất thường (cao/ thấp, quá tải)
4	Nút kiểm tra		

DISPLAY

Giá trị áp suất

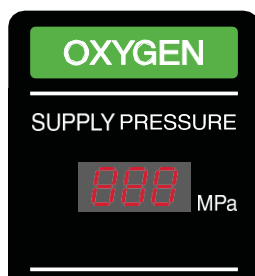

Đèn báo động

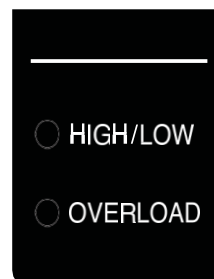

- Hình dạng và tính năng kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

CENTRAL UNI CO.,LTD.

Head office : 2-3-16 Nishikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0065 /TEL : +81-3-3556-8122 /FAX : +81-3-3556-1572
 Oversea division : 5-1-1Maigaoka, Kokuraminami-ku, Kitakyushu, Fukuoka, Japan 802-0823 /TEL+81-93-963-8331/FAX : +81-93-963-8291
 Branches : Hokkaido/Tohoku/Tokyo/Nagoya/Osaka/Hiroshima/Kyushu
 Factory : Kokura(Fukuoka)
 URL : <http://www.central-uni.co.jp>