

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS

39/11A Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, TP.HCM


Ngày 08 tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Tên trang thiết bị y tế: Dung dịch đệm rửa Dako PBS, Mã S3024	
1.4	Hướng dẫn sử dụng	1 gói được pha trong nước cất hoặc nước khử ion đạt đến thể tích cuối cùng là 1L. Dung dịch pha chứa 0.02 mol/L sodium phosphate, 0.15 mol/L NaCl, pH 7.0 và không được pha loãng hơn. Đối với đo dòng chảy tế bào cần phải lọc dung dịch qua giấy lọc kích thước lỗ 0.2 µm trước khi sử dụng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

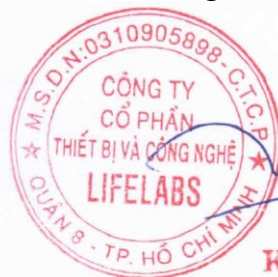

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đào Hoàng Vân